



Thermo Slim Body Shaper

PRESOTERAPIA
(Thermo Slim Body Shaper)

PRESOTHÉRAPIE
(Thermo Slim Body Shaper)

PRESSOTERAPIA
(Thermo Slim Body Shaper)

Thermo Slim Body Shaper

PRESSOTERAPIA
(Thermo Slim Body Shaper)

Thermo Slim Body Shaper



ENGLISH

THERMOSLIM BODY SHAPER

PRODUCT FUNCTIONS

This apparatus was carefully designed according to human bionics research, which combines functions of broken-fat, fat dissolved, lymphatic drainage, magnetic therapy of firm skin in one and using high-tech means to massage, do electrotherapy and pressure therapy to get significant effect.

Slimming

- Low frequency pulse electricity can stimulate the muscle to fremitus and shrink, which can decompose large quantity fat cell; Electric pads put on the points, which can adjust the function of inner body and restrain to come into be fat, to accelerate metabolism.
- Infrared ray makes a direct action on the fat structure which can release a great deal of heat energy accelerate the circulation of blood and lymph promote the metabolism speed biochemistry reaction consume AIP make catabolism of fat cells, largely decrease the fat cells.
- Air bags are inflated and deflated regularly with continually changed air pressure, which can rub off, dissociate, smash the fat cells.

Beautifying Body and Skin

- When weak bionic electric current stimulates sensory nerve ending in epidermis, the slack skin will be exquisite and springy.

Relaxing and Promoting Immunity


- The circulation of blood will be accelerated and muscle will be lessen after the micro electricity works on body.
- Heat energy generated by infrared ray can lessen the tensility of muscle relax the muscle.

Leading-in Medicine

- Stimulating the medicine absorption to reinforce healing effect.

Other Function

- Promoting curing, diminishing inflammation, keeping calm and sleeping peacefully, etc.

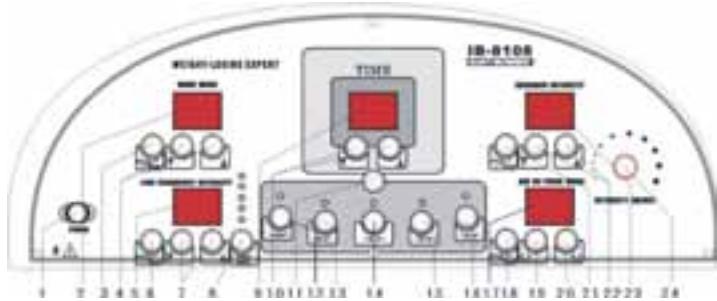


1. Power
2. Wave mode display
3. Manual/auto adjust switch
4. Wave mode adjust
5. Electro stimulation intensity display
6. Electro stimulation start/stop
7. Electro stimulation intensity adjust
8. Electro stimulation outlet switch (5 outputs)
9. Working time display
10. Working time adjust
11. Output start/ stop
12. Output of left arm switch
13. Output of right arm switch
14. Output of waist switch
15. Output of left leg switch
16. Output of right leg switch
17. Air pressure mode/Frequency display
18. Air pressure start/stop
19. Air pressure mode select
20. Air pressure frequency adjust
21. Infrared heating start/stop
22. Infrared heating intensity adjust
23. Infrared heating display
24. Air pressure intensity adjust


Remarks: When using air pressure, press any button of , then the left and right arms will be inflated at same time. And press , all the left and right feet will be inflated at same time. Press , then the left and right legs will be inflated at same time.




CONTROL SCREEN

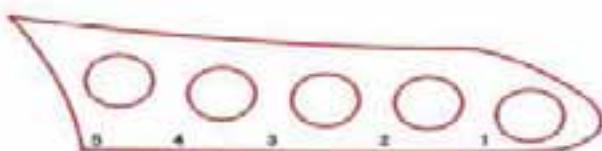

(Left) Output of electro stimulation.

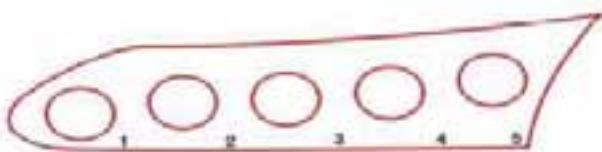

(Right) Output of infrared heating.

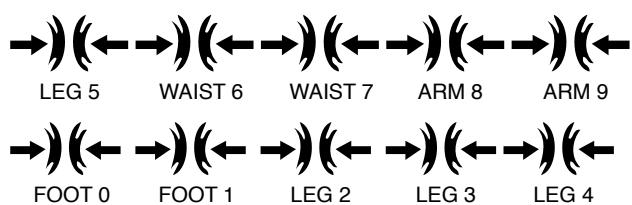

Output of air pressure de-toxin:

Output of spare part for foot: FOOT 0.

Output of spare part for leg: LEG 2 / LEG 3.

Output of spare part for waist: WAIST 6.

Output of spare part for arm: ARM 8.

(1) - Spare part for arm.

Air pressure output 8/9.

Infrared heating output 1/2.

(2) - Spare part for waist.

Air pressure output 6/7.

Infrared heating output 3.

(3) - Spare part of leg

Air pressure output 2/3/4/5.

Infrared heating output 4/5.

(4) - Blanket.


(5) - Spare part of boot

Air pressure output 0/1.

(6) - Infrared heating: connecter.

(7) - Air pressure pipe.

Connected with output.

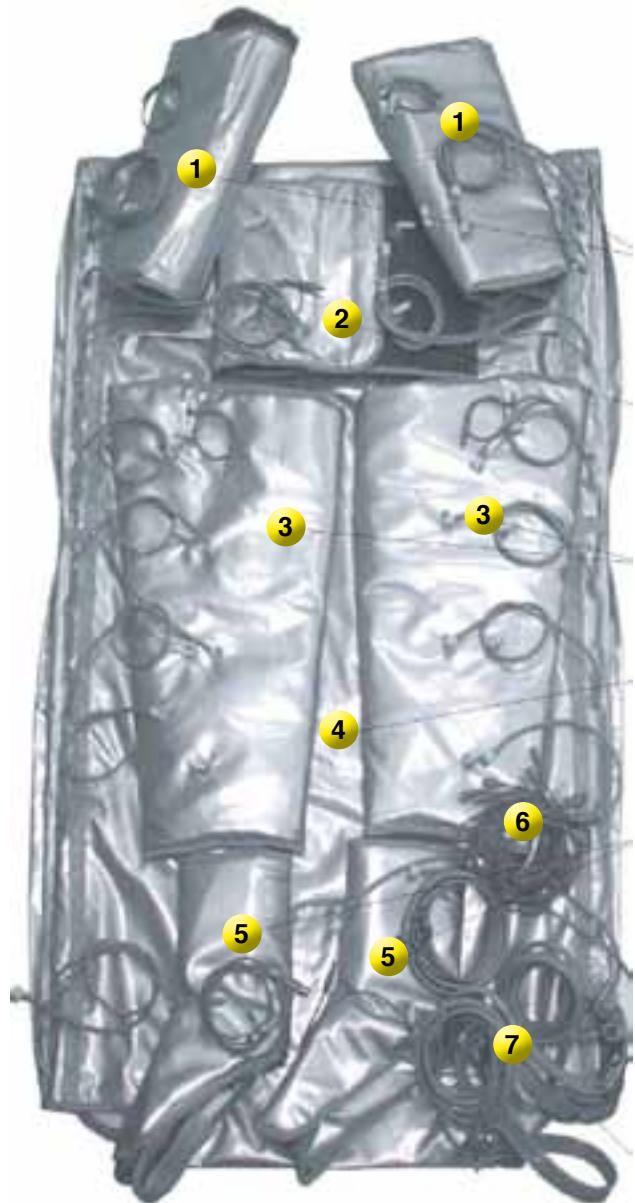

AIR PRESSURE CONNECT DIAGRAM



Connect here

Pull out connector by pressing the blue point showed in the figure.

ELECTRO STIMULATION PATCH CONNECT DIAGRAM




Electro simulation wire (connect with output)

Electro stimulation patch (put on skin)

Electro stimulation patch wire

INFRARED HEATING CONNECT DIAGRAM

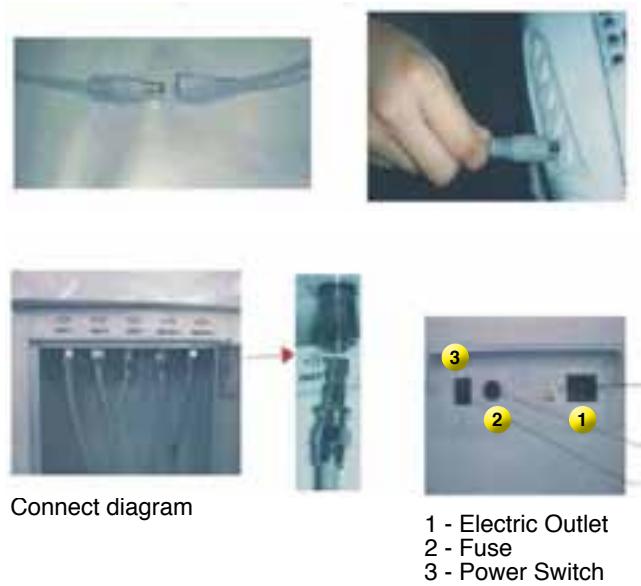

Connect diagram

1 - Electric Outlet
2 - Fuse
3 - Power Switch

OPERATION INSTRUCTION

1. Check and connect the power wire.
2. Turn on the power, the machine begin to work.
3. Connect the output port to the slimming clothes and electrode patch respectively. To make sure, the display is shown as "0"
4. Two method to wear the slimming clothes and electrode patches:
 - i.Put the electrode patches to the parts, with which you are not satisfied, and put on the slimming clothes for waist, arms and legs.
 - ii.Please wrap the preservative film and then put on the slimming clothes, in 30 minutes, take off

the preservative film and put the electrode patch on the parts.

5. Press the POWER button on the control panel.
6. Adjust Time: According to the working time to adjust the time on the machine of Button 10. The minimum time is one minute and the maximum is 60 minutes. Usually, the suitable time is 30 to 60 minutes.
7. Far Infrared
8. Far Infrared Adjust: Press Button 20 and 21 to adjust the intensity of far infrared. There are eight levels. According to the request of client to press "?" and "@" and select a proper intensity.

Note: Because the skin nature is different for everyone, please don't choose high intensity. To avoid burning, please wrap wet towel before put on the slimming clothes. It's shown as the machine is working while the little red spot sparkles under the right of the Liquid Crystal Display.

9. Air-pressure De-toxin Mode Adjust: There are three modes for air pressure:
 - 1. Air pressure from limb parts to center;
 - 2. Air pressure from center to limp parts;
 - 3. Air pressure begins together. For each mode, there are five selections of treating time,. Press Start/Pause, it works.
10. Electro Stimulation
 - (1) Select output: To select the output, please press the Start/Pause of 12-16. This is the way to select output one by one or together with anyone you want. If 5 outputs are expected to be operated at one time, please press Button 11.
 - (2) Low Frequency Adjust: Please press Button 7 to adjust the intensity of the low frequency. There are 8 levels for it. Press button 8 to select the output. It can be setting one output for one time. Press Start/Pause button, it begins work. Adjust the intensity; please press button "?" and "@".
 - (3) Wave Mode Select: Press Start/Pause, the machine begins or pauses to work. Press Manual/ Automatic to choose the suitable mode according to clients' request. In Automatic state, the red light is twinkling. On the other hand, it is Manual, which has five modes to choose.

1> Program one: Low Frequency to effect on fat cell and make the fat reduce from the fat cell and then achieve the result of losing weight .Be suitable for any body part.



2> Program Two: Movement for deeply losing weight. It makes the fat move from the deep layer. Be suitable for the deep fat layer.

3> Program three: Exercise muscle to losing weight. Be suitable for the beehive-like fat and with the excellent effect of tighten.

4> Program four: Continuous Wave to improve the lymph circulation and reduce the fat from the fat cell. Be suitable for block of lymph circulation with the obvious effect of de-toxin.

5> Program five: Impulse Wave to release the muscle and improve the fat movement.



2. Massage method around the knee.



3. Deep-press method.

4. Wring method.



5. Pounding method.

6. Chopping method.



7. Wring method with two hands.



8. Grasping method from center part to side on back and belly.



1. Press skin surface.



9. Press on back.



4. Air pressure massage for 15—30 minutes.

(1) Please wrap the client with preservative film on the body they want treatment. Then the client should put on the slimming cloth accessory and lie on the facial bed.

(2) Start the machine by pressing the power button.

Look at the panel diagram 1)

(3) Pause the output of electro stimulation and infrared heating. Look at the panel diagram 6, 21.

(4) Press the button of output start/stop. Look at the panel diagram 11.

(5) Adjust the air pressure mode and time, which should be according to the client's capability. Look at the panel diagram 17,18, 19,20,24.

5. Infrared heating for 20—30 minutes.

(1) Please wrap the client with wet towel on the body the want treatment.

Then the client should put on the slimming cloth accessory and lie on the facial bed.

(2) Start the machine by pressing the power button.

. Look at the panel diagram 1).

(3) Pause the output of electro stimulation and air pressure. Look at the panel diagram 6, 18.

(4) Press the button of output start/stop. Look at the panel diagram 11.

(5) Adjust the heating intensity to 8 , then when the temperature reach high adjust the intensity to 5/6 to keep temperature. Look at the panel diagram 21, 22, 23.

6. Electro stimulation for 10 minutes


(1) Start the machine by pressing the power button



. Look at the panel diagram 1.

(2) Pause the output of air pressure and infrared heating. Look at the panel diagram 18, 21.

(3) Press the button of output start/stop . Look at the panel diagram 11.

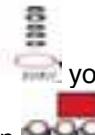

(4) Choose the output with button you want,

then adjust the intensity with button . Look at the panel diagram 7.

(5) We can choose manual or auto to adjust the mode. When the red light is twinkling, that is manual state, on the other hand that is auto. There is



5 modes in manual state . Look at the panel diagram 2, 3, 4.

(6) The position of electrode patch, the pictures as follows;

1> Picture one: for shoulder and neck.



Picture 1

Function: Improve he blood circulation of shoulder and neck part; Lose weight for shoulder and neck part; Release tire.

2> Picture two: for shoulder and arm.



Picture 2

Function: Improve the blood circulation of shoulder and arm; Lose weight for arms.



3> Picture Three: for belly



Picture 3

Function: improve the blood circulation of belly;
Lose weight for belly;

4>Picture Four: for thigh.



Picture 4

Function: Con tract the muscle of thigh.

Lose weight for thigh.

7. We can choose to do treatment of Air pressure/
Infrared heating/Electro stimulation.

8. Take shower again after treatment.

9. The whole treatment is advised for 90 minutes.

OTHER PROPOSAL FOR AIR PRESSURE

1. Lose weight for legs:

(i) Put on the slimming cloth accessory of boots and legs.



(ii) Press the button . Look at the panel diagram 15.

(iii) Adjust the air pressure mode and frequency as



 (Look at the panel diagram 17,18,19,20).

2. Relax the whole body:

(1) Put on the slimming cloth.



(2) Press buttons

(3) Adjust the air pressure mode and time as



 (Look at the panel diagram 17,18,19,20)

3. Air pressure de-toxin:

(1) Put on the slimming cloth



(2) Press buttons



(3) Adjust the air pressure mode and frequency as



 . Look at the panel diagram 15, 16, 17,18.

Remarks: In the treatment, if the client feels the intensity too strong, please adjust it by button



 . Look at the panel diagram 24.

CAUTION

1. Massage the body with body-firming cosmetic (gel or oil) on the electrode patch to get the better effects. The intensity should subject to the client's feeling. The temperature should be adjusted from lower to higher gradually. In case of the pain feeling, please check whether the electrode patch contact with the skin fully.

2. For the far infrared function, it should be set as 8 level first, while client feels hot, please turn the level as 5 to 6. Keep this temperature.

The winter/summer changeover switch that's located above the footplate is selected according to the season and temperature of the room.

3. During the whole treatment, beautician should communicate with the client check the temperature and perspiration, and make the adjustment correspondingly.

4. During the treatment, please keep the machine in situation of Pause for this function if you want to stop certain treatment.

5. Please sterilize the slimming clothes and electrode patch with 50% alcohol after using

SPECIFICATIONS

Power	Voltage	Hz.
240/110V	350W	50/60Hz.
Weight	Main machine: 29 Kg	Size Main machine / Blanket
	Blanket: 6,6 Kg	103 55 46 cm 91 41 26 cm

ACCESSORIES PACKING LIST

Item Name	Unit	Quantity	Remarks
Mainframe	Set	1	
Slimming cloth	Set	1	
Patch wire	Strip	5	
Elastic band	Set	1	
Blanket	Set	1	
65 Electrode patch	Piece	5	
95 Electrode patch	Piece	5	
Power wire	Strip	1	
Fuse	Piece	2	
Instruction	Piece	1	

ORDINARY MALFUNCTION REMOVING

Malfunction	Removing
No work when starting	Checking power if been well connected
	Checking power if power if been turned on
Electro pad no output	Checking electro stimulation pad if been well connected with machine
	Checking electro electro stimulation pad if been well connected with wire.
Slimming cloth no heating	Checking slimming cloth if been well connected with machine
Slimming cloth no infllaction	Checking plastic connected if been well connected with machine
When working machine overheating	Over working, please turn off machine to cool ingoff
	Checking the AC if normal (checking by professionals)

IMPORTANT SAFETY NOTICE

1. Please don't disassemble the equipment or try to do some other operation, which have not been indicated in our instruction. All the repairing work should be done by our admitted professional personnel
2. Please don't assemble or operate this equipment while you are near the water or your hands are wet. Notice that don't pour the liquid on it.
3. Please pull out the plug from the socket when you met such conditions as below. And keep in touch with professional maintenance Station.
 - 1> The equipment touched liquid.
 - 2> The equipment has abnormal smell, smoking or loud and strong noise.
 - 3> The Cable is broken
 - 4> The equipment is fallen down and broken
4. Please don't put anything on the cables, don't place the equipment at any place where someone can step on the cable.
5. Please pull out the power cable after using it for your safety.



6. Don't put anything into the equipment's jack, otherwise it may cause fire or touch the electricity. If something enters the equipment, please don't pick it out by yourself, contact distributor or our company immediately
7. Please don't put the equipment on the anything that can't stand steadily, avoid it turns over and damage.
8. Our company has the right to modify the information in this introduction before notify! And keep the explanations right for the above.

- La grasa liberada genera una gran cantidad de energía térmica, acelerando la circulación de la sangre y los ganglios linfáticos, acelerando el metabolismo mediante una reacción bioquímica que consume AIP y provoca el catabolismo de las células grasas lo que propicia también la
 - Disminución de la grasa.
- Las bolsas de aire que se inflan y desinflan regularmente con continuos cambios de presión para disociar y destruir las células de grasa.

Embellecimiento

Cuando la corriente biónica estimula los nervios sensoriales que terminan en la epidermis, la piel flácida recupera su elasticidad y tersura.

Efecto relajante y que beneficia el sistema inmunitario

- La circulación de la sangre se acelera y los músculos se refinan debido a la microelectricidad que trabaja en el cuerpo.
- El calor generado por los rayos infrarrojos alivia la tensión muscular y relaja el músculo.
- El aparato estimula la absorción de los productos utilizados reforzando su poder curativo
- Disminuye la inflamación.

ESPAÑOL

PRESOTERAPIA (ThermoSlim Body Shaper)




FUNCIONES PRESOTERAPIA

Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado para ser utilizado en estética, fisioterapia, medicina estética, oncología y angiología para el drenaje y reducción de los edemas venosos y linfáticos. Produce una activación de la circulación de retorno (venoso y linfático), estimulando la reabsorción de líquidos intersticiales y el drenaje de estos líquidos hacia los filtros orgánicos.

Adelgazamiento

- La electricidad de baja frecuencia puede estimular el músculo hasta conseguir un efecto thrill o de contracción que llega a descomponer una gran cantidad de células grasas.
- Las almohadillas eléctricas colocadas en los puntos exactos pueden ajustar la función del organismo interno acelerando el metabolismo e impidiendo la formación de nuevas células grasas.
- Los rayos infrarrojos penetran directamente en la estructura celular.

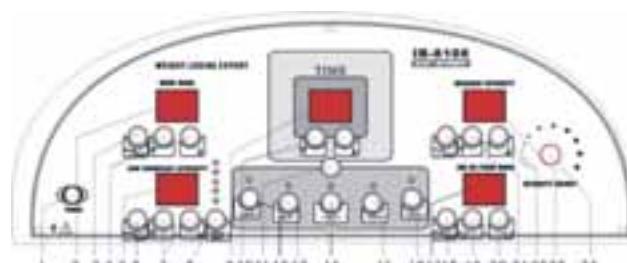

1. Encendido
2. Visualización del modo de trabajo electro-estimulación.
3. Selección modo Manual / automático, para la electro-estimulación
4. Selección de programa de trabajo electro-estimulación.

- 5. Pantalla visualización intensidad de la electro-estimulación.
- 6. Selector de encendido/apagado electro-estimulación.
- 7. Botones para ajuste de intensidad de la electro estimulación.
- 8. Selector de cada una de las 5 salidas de la electro estimulación.
- 9. Pantalla visualización del tiempo de trabajo.
- 10. Ajuste de tiempo de trabajo
- 11. Botón de selección marcha/paro funcionamiento general de la maquina.
- 12. Botón salida Brazo izquierdo
- 13. Botón salida Brazo derecho
- 14. Botón salida de la cintura
- 15. Botón salida de la pierna izquierda
- 16. Botón salida de la pierna derecha
- 17. Pantalla de visualización del programa de trabajo de la presoterapia
- 18. Marcha / paro de la función de presoterapia
- 19. Seleccionar el modo de llenado de aire
- 20. Ajustar la presión del aire frecuencia
- 21. Marcha / paro de la función de infrarrojos
- 22. Ajustar la intensidad de calor por infrarrojos
- 23. Pantalla de visualización de los infrarrojos
- 24. Ajustar la intensidad de la presión del aire.

- Mejora el trofismo y recuperación de la elasticidad cutánea. Cuidados post parto. Prevención de trombosis de encamados. Enfermedades neurológicas
- Algoneurodistrofias musculares
- Relajación (indirectamente estimula la circulación general ayudando al bienestar general)
- En la post cirugía estética por restablecer la normalidad de la zona, fundamental después de una liposucción, liposculptura e hidroliposucción
- Desintoxicación general del organismo
- Mala circulación periférica.

CONTRAINDICACIONES

- Tromboflebitis o flobotrombosis recientes
- Varices importantes tortuosas
- Infecciones cutáneas.
- Linfangitis
- Artritis inflamatoria
- Descompensación cardiocirculatoria
- Trastornos importantes de la tensión arterial
- Infarto de miocardio
- Neoplasias
- Insuficiencia cardiaca y/o respiratoria y/o renal importantes
- Inflamaciones agudas

INDICACIONES

- Estímulo de la circulación de retorno venosa y linfática
- Mantenimiento de la normal circulación de retorno
- Prevención de varices en presencia de sintomatología que las precede (pesadez de piernas, piernas cansadas, edema, retención de líquidos, etc)
- Linfedemas y edemas venosos
- Edemas post-quirúrgicos
- Edemas post-traumáticos
- Celulitis
- Obesidad

LAS SESIONES

No hay límite de tiempo en cuanto a la duración de la sesión de presoterapia, pudiendo llegar a ser de horas en casos de edemas muy importantes. Con finalidad estética, las sesiones serán de 30-45 min aproximadamente, dependiendo del objetivo a tratar.

En cuanto a la frecuencia de las sesiones, como medida terapéutica suelen practicarse 2-3 sesiones a la semana, aunque en algunos casos severos, puede llegarse a una sesión diaria.

Cuando la presoterapia se utiliza dentro de un tratamiento combinado, se aplicará al final de la sesión, después de los otros métodos empleados.



PANTALLA DE CONTROL

(1) - Recambio de brazo

Salida de aire a presion 8/9.

Salida de calefaccion de infrarrojos 1/2.

(2) - Recambio de cintura

Salida de aire a presion 6/7.

Salida de calefaccion de infrarrojos 3.

(3) - Recambio de piernas

Salida de aire a presion 2/3/4/5.

Salida de calefaccion de infrarrojos 4/5.

(4) - Manta.

(5) - Recambio de pies

Salida de aire a presion 0/1.

(6) - Calefaccion por infrarrojos conector.

(7) - Tubo de presion de aire.

Conectado con la salida.

* Por favor conecte la tubería con el número correcto.


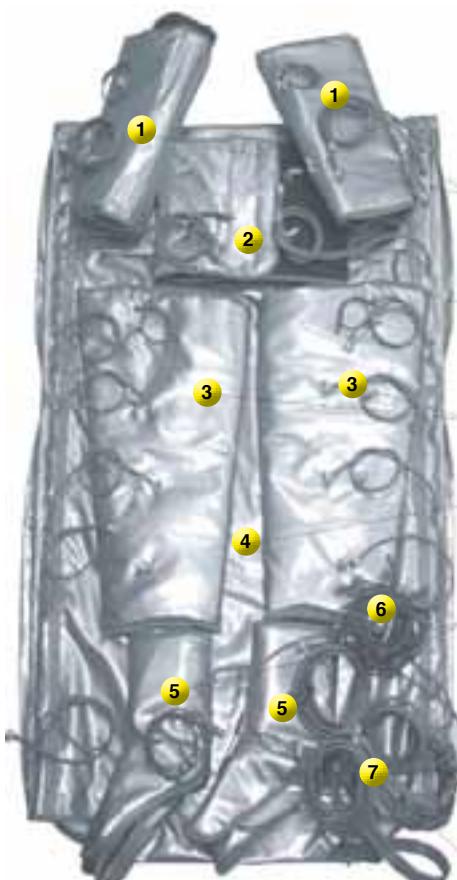


DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE PRESIÓN DE AIRE

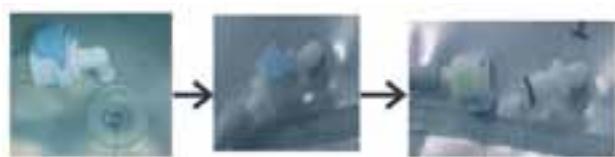

Conekte aquí

Saque el conector presionando el punto azul mostrado en la foto

PARCHE DE ELECTRO ESTIMULACIÓN CONECTAR A DIAGRAMA



Cable de electro estimulación (Conektar con salida)



Parche de electro estimulación (Poner en la piel)



Electro estimulación parche con cable

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE CALEFACCIÓN POR INFRARROJOS



Diagrama de conexiones.



1 - Toma de corriente eléctrica
2 - Fusible
3 - Interruptor de encendido

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el cable a las toma de red eléctrica.
2. Accione el botón de encendido en la parte trasera de la máquina.
3. Verifique que ha montado correctamente todos los tubos de aire e infrarrojos, tanto a la máquina principal, como a cada una de las partes que componen la manta de presoterapia. Todos los cables y tubos llevan su numeración correspondiente para asegurar que el montaje sea correcto.
4. Pulse el botón POWER, en la consola principal de la máquina.
5. Ajuste el tiempo de trabajo, en el botón 10. El tiempo mínimo es de 1 minuto y el máximo que se puede programar es de 60 minutos. Normalmente le recomendamos que programe entre 30-60 minutos.
6. Infrarrojos. Con el botón 21, puede activar o desactivar la función de infrarrojos. Si un punto rojo aparece en la pantalla de visualización (24), está función está activa. Si pulsa el botón 21 de nuevo la puede desactivar en cualquier momento, por tanto el punto rojo desaparecerá en la pantalla de visualización (24). Existen ocho niveles de intensidad que puede ajustar, en función de las necesidades de cada caso a tratar. No es recomendable, la utilización de esta terapia en clientes con problemas circulatorios.

NOTA: Debido a que la naturaleza de la piel de cada uno es diferente, le recomendamos no elegir una intensidad alta, para evitar quemaduras.

7. **AIR DE TOXIC MODE.** (pantalla nº 17). Para activar o desactivar, la función de llenado de la presoterapia, lo debe hacer con el botón nº18. Si un punto rojo, se muestra en la pantalla 17, está función está seleccionada, si el punto rojo no se visualiza, indica que esa función no está activa en ese momento. La máquina dispone de 3 modos de llenado del aire. Estos se pueden seleccionar con el botón nº 19:

- En el modo 1, la presión del aire, ejerce desde los pies, hasta la cintura
- En el modo 2, la presión del aire, ejerce desde la cintura a los pies.
- En el modo 3, la presión del aire, es en todas las partes al tiempo (función bombeo).

Con el botón nº 20, puede seleccionar la velocidad de llenado de las cámaras de aire. Dispone de 5 niveles de selección.

Con la ruleta nº 24 puede ajustar también la intensidad de la presión de aire.

Como medida higiénica, se recomienda siempre el uso de pantalones de celulosa específicos para este tipo de tratamiento, para cada cliente.

8. **ELECTROESTIMULACIÓN.** Para que esta función esté activa, en la pantalla nº 4, debe visualizar un punto rojo. Si desea desactivarlo puede hacerlo en el botón nº 6 (el punto rojo desaparecerá de la pantalla de visualización). Asegúrese, de haber conectado los cables de esta función en el frontal de la máquina, y los electrodos por parejas (uno positivo + uno negativo), en cada uno de los cables. Para su correcto uso, debe colocar las cinchas elásticas en el paciente, y aplicar una pequeña cantidad de gel conductor, en cada uno de los electrodos, antes de ser introducidos en las cinchas de sujeción previamente colocadas en el cliente.

Pulse el botón nº 11 que es el que activa el funcionamiento general de la máquina. Si solo va a trabajar con la electro estimulación, le recomendamos que desactive tanto la función presoterapia, como la de infrarrojos ya que no van a ser utilizados.

Es el momento de seleccionar el modo de onda, con el que vamos a trabajar. La máquina dispone de 5 programas pre-configurados, los cuales puede seleccionar con los botones 3 y 4, y visualizar en la pantalla nº 2.

- **Programa 1.** Adecuado para cualquier parte del cuerpo, está destinado a adelgazamiento y reducción de grasa.
- **Programa 2.** Recomendado para pérdida de peso. Para tratar grasa más profunda
- **Programa 3.** Tonificante / reafirmante.
- **Programa 4.** Destinado a mejorar la circulación venosa y linfática, realizando un drenaje y facilitando la expulsión de grasa y toxinas.
- **Programa 5.** Relajante. Encaminado a liberar el músculo y movilizar la grasa.

También debe seleccionar si quiere que esa selección sea manual, o si prefiere que la máquina vaya pasando automáticamente de un programa a otro. La selección se hace en el botón nº 2. Si un punto rojo aparece en la pantalla nº 2, el funcionamiento es automático. Si por el contrario, no está el punto rojo, la selección es manual, del programa de su elección, preseleccionada anteriormente.



Con el botón nº 8, puede ir pasando de una en una, por cada una de las salidas de electro estimulación, ya que las debe ir configurando independientemente, cada una de ellas. Por cada vez que pulse el botón 8, la luz roja se irá desplazando por cada uno de los 5 pilotos que se encuentran situados encima del botón. Y por cada uno de ellos, debe seleccionar la intensidad de pulso, con los botones 7 y 8, adecuado a la sensibilidad del cliente. La máquina dispone de 8 niveles de intensidad.

PROCESO DE TRATAMIENTO

1. Acomode al cliente en una camilla.
2. Coloque pantalones especiales para presoterapia o similar.
3. Realice un masaje durante 15-20 min
(El efecto será mejor si utiliza cosméticos específicos para adelgazamiento)
4. Coloque cada uno de los accesorios de la manta de presotarapia. Sesión de presotarapia durante 15-30 minutos.
 - (1) Conecte la máquina en el botón de encendido.
 - (2) compruebe que está activa la función de presoterapia
 - (3) Detenga la función de la estimulación eléctrica y de calefacción por infrarrojos.
 - (4) selección de tiempo de trabajo
 - (5) Ajuste la presión del aire y el de trabajo, acorde con las condiciones particulares de cada cliente
 - (6) si lo desea active la función de calefacción por infrarrojos
 - (7) una vez finalizado el tratamiento, si lo desea puede hacer una sesión de electro-estimulación durante unos 10 minutos.
 - (8) podemos elegir manual o automático. Cuando la luz roja está en la pantalla de visualización, el modo de trabajo es automático
 - (9) La posición de los electrodos de parche, se debe colocar siempre con gel conductor, y al inicio y finalización del músculo, para evitar lesiones.
 - (10). Todo el tratamiento puede durar 90 minutos.

Guía Básica De Masaje



1. Presione la superficie de la piel.



2. Método de masaje alrededor de la rodilla.



3. Método de presión profunda.

4. Método de retorcer.



5. Método de golpe.

6. Método de corte.



7. Método de torcer con dos manos.



8. Método de agarre desde el centro a lado en la parte posterior y el vientre.



9. Apreta en la espalda.

Función: mejorar la circulación de la sangre en la zona y reducción de peso

4> Muslos.

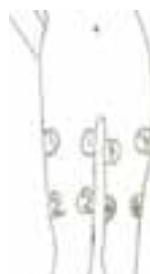


Imagen 4

Función: Tonificar la zona y reducción de peso.

La posición del parche electrodo, como se indica en las imágenes siguientes:

1> Hombro y cuello.



Imagen 1

Función: mejorar la circulación de la sangre.

2> Hombro y brazo.



Imagen 2

Función: mejorar la circulación de la sangre en la zona y reducción de peso.

3> Abdomen.



Imagen 3

PRECAUCIÓN

1. Siempre es aconsejable la utilización de gel conductor en los electrodos parche de la gimnasia pasiva para obtener mejores resultados. La intensidad la debe ajustar según las sensaciones que le indique el cliente. Se debe ajustar de menos a más gradualmente. Si hay sensación de dolor, verifique que el parche es encuentra en perfecto contacto con la piel.
2. Para la función de infrarrojo, se debe establecer como nivel 8 al inicio del tratamiento y una vez el cliente note calor, debe disminuir el nivel a 5 o 6. Mantener esta temperatura.
3. Durante todo el tratamiento, debe comunicarse con el cliente, a fin de verificar la temperatura y poder hacer el ajuste correspondiente.
4. Durante el tratamiento, por favor, situe la máquina en situación de pausa de los tratamientos que no se realicen en esa sesión
5. Por favor, utilice siempre pantalones desechables o bien esterilice correctamente el consumible que utilice para cada cliente.

ESPECIFICACIONES

Potencia	Voltaje	Hz.
240/110V	350W	50/60Hz.
Peso	Peso Máquina principal: 29 Kg	Dimensiones Máquina principal / Manta
	Manta: 6,6 Kg	103 55 46 cm 91 41 26 cm

LISTA DE ACCESORIOS DE EMBALAJE

Nombre del artículo	Unidad	Cantidad	Observaciones
Cuerpo de aparato	Grupo	1	
Tela de adelgazamiento	Grupo	1	
Cable de parche	Tira	5	
Banda elástica	Grupo	1	
Manta	Grupo	1	
65 Parche electrodos	Pieza	5	
95 Parche electrodos	Pieza	5	
Cable de potencia	Tira	1	
Fusible	Pieza	2	
Instrucciones	Pieza	1	

FALLO DE MONTAJES ORDINARIOS

Mal Funcionamiento	Desmontaje
No funciona cuando Encendido	Compruebe que este bien Conectado
	Compruebe que este encendido
No hay electricidad	Compruebe que el cable de Electro estimulacion este bien Conectado con la maquina
	Compruebe que el cable de Electro estimulacion este bien Conectado con el cable
Cuerpo del aparato no Calienta	Compruebe que el cuerpo del Aparato este bien conectado a La maquina
Cuerpo del aparato no se Infla	Compruebe el Conector de control de plástico Si esta conectado a la maquina
Cuando aparato Encendido se recalienta	Se recalienta, por favor apaguelo Hasta que se enfrie
	Compruebe el si el ac esta Normal. (Revisar por profesional)

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Por favor, no desmonte el equipo o trate de hacer alguna otra Operación, que no se estén indicadas en nuestras instrucciones. Todas las reparaciones, deben ser hechas por nuestro personal técnico.
2. Por favor, no utilizar el equipo mientras que usted está cerca del agua o sus manos están mojadas. No verter líquido sobre ella.
3. Por favor, retire el enchufe de la toma eléctrica cuando suceda una de las situaciones descritas a continuación:
 - 1) El equipo se ha mojado
 - 2) El equipo tiene olor a quemado, o hace un ruido extraño
 - 3) El cable está roto
 - 4) El equipo presenta rotura
4. Por favor, no modifique ni altere los cables, no



- coloque el equipo en un lugar donde alguien pueda pisar el cable.
5. Por favor, extraiga el cable de alimentación después de usarlo para su seguridad
 6. No se ponga nada dentro del equipo, en caso contrario puede provocar fuego en el aparato o descarga eléctrica. Si algo entrase en el interior del equipo accidentalmente, pongase en contacto con el servicio técnico de nuestra empresa inmediatamente.
 7. Por favor, poner el equipo en un lugar estable para que no se dañe
 8. Nuestra empresa tiene el derecho de modificar la información contenida en este manual antes de comunicarla.

formation de nouvelles cellules graisseuses.

- Les rayons infrarouges pénètrent directement à la structure cellulaire.
- La graisse libérée génère beaucoup d'énergie thermique, ce qui accélère la circulation sanguine et les ganglions lymphatiques, le métabolisme d'accélération signifie une réaction biochimique qui consomme AIP et provoque le catabolisme des cellules graisseuses qui favorise aussi le
- Réduction de la graisse.
- Les coussins gonflables gonflent et se dégonflent régulièrement avec des changements continus de pression à dissocier et détruire les cellules graisseuses.

Embellissement

Lorsque le courant bionique stimule les nerfs sensoriels se terminant dans l'épiderme, la peau mou récupère son élasticité et douceur.

Effet relaxant et fait du bien au système immunitaire

- Le flux sanguin s'accélère et les muscles sont affinés en raison de micro électricité qui travail dans le corps.
- La chaleur générée par les rayons infrarouges reliefs la tension musculaire et détendre les muscles.
- Le dispositif stimule l'absorption des produits utilisé pour renforcer son pouvoir de guérison
- Elle réduit l'inflammation.




DES FONCTIONS DU PRESSOTHÉRAPIE

Cet appareil a été soigneusement conçu pour être utilisé en chirurgie, la physiothérapie, la médecine esthétique, oncologie et angiologie pour drainer et réduits veineux et oedème lymphatique. L'activation se produit la circulation de retour (veineuse et lymphatique) en stimulant la réabsorption des fluides interstitiels et égouttage ces liquides vers les filtres organiques.

Amaigrissement

- La electricidad de baja frecuencia puede estímulos. L'électricité basse fréquence peut stimuler le muscle pour obtenir un effet de frisson ou la contraction décomposer atteindre une grande quantité des cellules graisseuses.
- Les plots électriques placés sur les points peut ajuster la fonction exacte de l'organisme accélérer le métabolisme interne et empêchant la



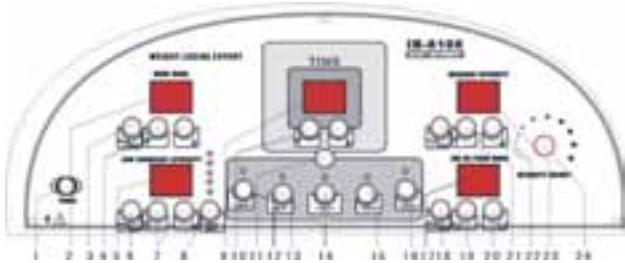

1. Puissance
2. Affichage en mode travail électro-stimulation
3. Sélection Manuel / Mode automatique pour la électro-stimulation
4. Sélection du programme de travail électro-stimulation.
5. Écran intensité de l'affichage de l'électro-stimulation.
6. Activer / désactiver électro-stimulation
7. Boutons de réglage de l'intensité de l'électro-stimulation.
8. Sélecteur de chacune des cinq sorties de l'électro-stimulation.
9. Affichage de l'écran du temps de travail.
10. Réglez le temps de travail
11. Sélectionnez le bouton de démarrage / d'arrêt de fonctionnement général de la machine.
12. Bouton sortie bras gauche
13. Bouton sortie bras droit
14. Bouton sortie taille
15. Bouton sortie de la jambe gauche
16. Touche sortie de la jambe droite
17. Ecran d' affichage de programme de travail de la présothérapie.
18. Démarrer/ Stop de la fonction de la thérapie
19. Sélectionnez le mode rempli d'air
20. Régler la pression de l'air fréquence.
21. Marche / arrêt fonction infrarouge
22. Réglez l'intensité du chaleur par infrarouge
23. L'écran d'affichage par infrarouge.
24. Régler l'intensité de la pression d'air.

INDICATIONS

- Stimulation de la circulation retour veineux et lymphatique
- Maintien de la circulation de retour normale
- Prévention des varices en présence de symptômes qui précède (jambes lourdes, les jambes fatigués, oedème, la rétention d'eau, etc.)
- Lymphoedème et de l'œdème veineux
- Œdème post-opératoire
- Œdème post-traumatique
- Cellulite
- Obésité
- Amélioré du trophisme de récupération de l'élasticité du peau. Soins post-partum. La prévention de la thrombose grabataire. Les maladies neurologiques
- Algoneurodistrophies musculaires.
- Relaxation (stimule indirectement la circulation aidant généralement le bien-être général)
- Dans le post chirurgie esthétique pour rétablir la normalité région, après une liposuccion et hydrolipoclasia.
- Désintoxication générale du corps
- Mauvaise circulation périphérique.

CONTRE-INDICATIONS

- Thrombophlébite ou récente flobotrombosis
- Varices tortueuses importants
- Infections de la peau.
- Linfangitis
- Arthrite inflammatoire
- Décompensation cardiocirculatoire
- Troubles importants de la pression artérielle
- Infarctus du myocarde
- Neoplasias
- Insuffisance cardiaque significative et / ou respiratoire et / ou du rein
- Inflammations aiguës

LES SÉANCES

Il n'y a aucune limite de temps sur la durée de la séance de thérapie de pression, peut se révéler d'heures œdème cas très importants. Pour des raisons esthétiques, sessions seront d'environ 30-45 min, en fonction de la cible à traiter.

En ce qui concerne la fréquence des séances, comme mesure thérapeutique généralement effectuée 2-3 séances par semaine, bien que dans certains cas graves, il peut être un séance quotidienne.

Lorsque la presotherapy est utilisé dans le traitement combinée, qu'il appliquera à la fin de la session, après d'autres méthodes.

L'ECRAN DE CONTRÔLE

(1) - le bras de remplacement

Sorite d'air pression 09/08.

Sortie de chauffage infrarouge 1/2.

(2) – remplacement de la taille

Sortie d'air pression 6/7.

Sortie de chauffage infrarouge 3.

(3) – recharge de jambes

Sortie d'air pression 2/3/4/5.

Sortie de chauffage infrarouge 4/5.

(4) - Couverture.

(5) – Recharge de pieds

Sortie d'air de 0/1.

(6) – chauffage par connecteur infrarouge.

(7) - tube de pression de l'air.

Reliée à la sortie.

* S'il vous plaît connecter le tuyau avec le bon numéro.

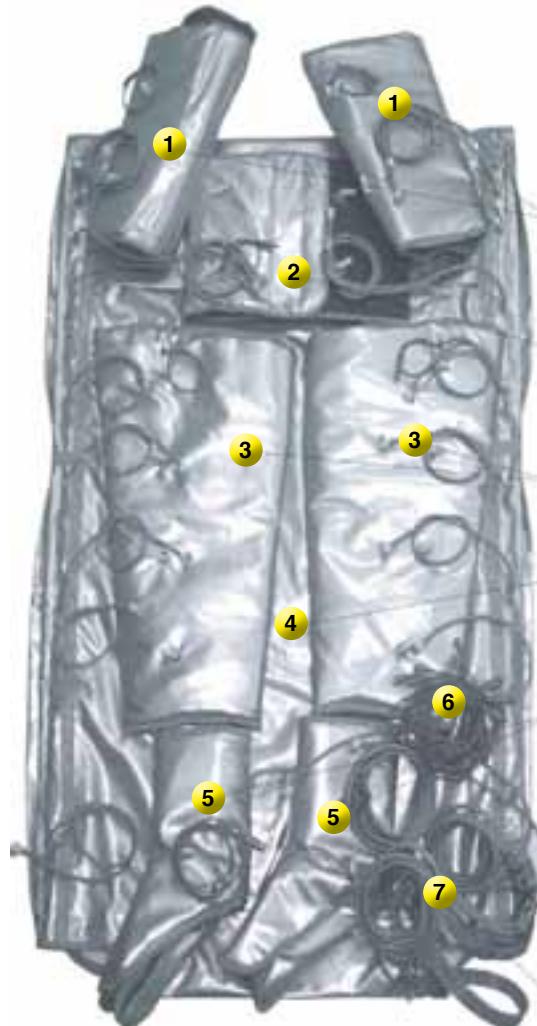


SCHÉMA DE CONNEXION DE PRESSION DE L'AIR



Connectez ici



Retirez le connecteur pressage bleu point montré dans la photo

PATCH ELECTRO STIMULATION


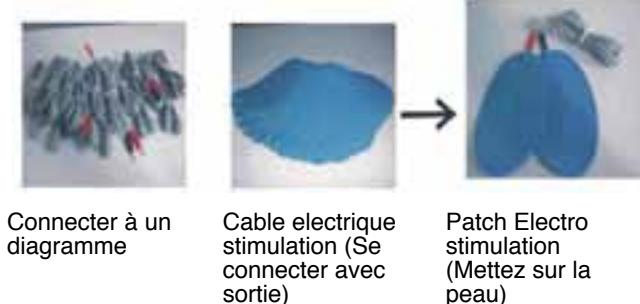


DIAGRAMME DE RACCORDEMENT DE CHAUFFAGE PAR INFRAROUGE

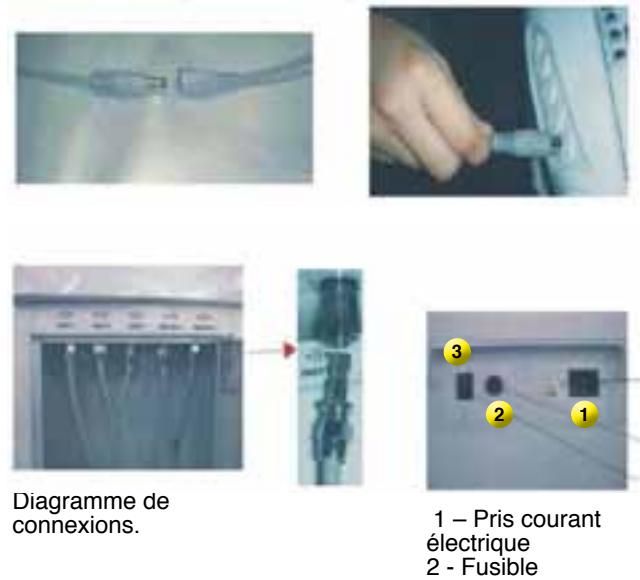

MODE D'EMPLOI

1. Branchez le câble à la prise de courant.
2. Actions du bouton d'alimentation à l'arrière machine.
3. Vérifiez que vous avez réussi à installer tous les tubes d'air et infrarouge à la fois la machine principale, à chacune des parties couverture pressothérapie. Tous les câbles et des tubes pour porter le numérotée correspondant veiller à ce que le montage est correct.
4. Appuyez sur le bouton POWER de la console principale de la machine.

5. Régler le temps de travail dans le 10 Bouton. Le temps minimum est de 1 minute et le maximum qui peut être programme est de 60 minutes. Normalement, nous recommandons pour planifier 30-60 minutes.
6. Infrarouge. Avec le bouton 21, vous pouvez le désactiver la Fonction IR. Si un point rouge apparaît sur l'écran d'affichage (24), cette fonction est active. Appuyez de nouveau sur le bouton 21 peut désactiver à tout moment, donc le point peut disparaître rouge à l'écran (24). Il y a huit niveaux d'intensité qui peut ajuster, en fonction des besoins de chaque cas à traiter. Il est déconseillé, l'utilisation de ce thérapie sur les clients ayant des problèmes circulatoires.

NOTE: En raison de la nature de la peau de chacun on est différent, nous recommandons de ne pas choisir un haute intensité, pour éviter les brûlures.

7. AIR DE MODE TOXIQUE. (Écran n ° 17). Pour activer ou désactiver la fonction de remplissage du prisonnier thérapie, il le fait avec le bouton n ° 18. Si un point rouge, est affiché sur l'écran 17, cette fonction est sélectionnée si le point rouge est pas affiché, il indique cette fonction n'est pas actif à ce moment.. La machine dispose de 3 modes de remplissage de l'air.

Ceux-ci peuvent être sélectionnés avec le bouton n ° 19:

- En mode 1, la pression d'air exercée à partir de pieds jusqu'à la taille.
- En mode 2, la pression d'air exercée à partir de la taille vers les pieds .
- En mode 3, la pression d'air est dans tous les parties à même temps. (fonction de la pompe).

Avec le bouton 20 , vous pouvez sélectionner la vitesse le remplissage des chambres à air. Il y a 5 niveaux de sélection.

Avec la roulette n ° 24, vous pouvez également ajuster l'intensité de pression d'air.

Par mesure d'hygiène, il est recommandé de toujours porter des pantalons de cellulose spécifique pour cette type de traitement, pour chaque client.

8. ELECTROSTIMULATION. Pour que cette fonctionnalité est active dans l'écran n ° 4, vous devriez voir un point rouge. Si vous souhaitez le désactiver, vous pouvez le faire dans le Bouton 6 (le point rouge disparaît de l'écran Display).

Assurez-vous que vous avez connecté le cette fonction câbles sur le devant de la machine, et paires d'électrodes (une + positif négatif) dans chacun des câbles. Pour une utilisation correcte, sangles élastiques doivent être placées sur le patient, et appliquez une petite quantité de gel conducteur sur chacune des électrodes, avant d'être introduits dans des sangles de fixation, précédemment mis en le client.

Appuyez sur le bouton # 11, qui est l'opération qui active la machine général. Si vous seulement travaillez avec une stimulation électro, nous recommandons prisonnier désactiver la fonction à la fois la thérapie, comme infrarouge, car ils ne seront pas utilisés.

Il est temps de sélectionner le mode d'onde, avec lequel nous allons travailler. La machine a 5 programmes prédefinis qui peuvent choisir avec les touches 3 et 4, et d'afficher sur le # 2 écran.

- Programme 1. Convient pour n'importe où le corps est conçu pour l'amincissement et réduction de la graisse.
- Programme 2. recommandée pour la perte du poids. Pour traiter la graisse profonde
- Programme 3. Tonifiant / raffermissant.
- Programme 4. Conçu pour améliorer la circulation veineux et le drainage lymphatique et facilitant l'expulsion des graisses et des toxines.
- Programme 5. relaxant. Vise à libérer le de mobiliser les muscles et la graisse.

Indiquez également si cette sélection soit manuellement, soit vous préférez avoir la machine aller déplacer automatiquement d'un programme à l'autre. La sélection se fait sur le bouton de numéro 2. Si un point rouge apparaît sur l'écran n ° 2, l'opération est automatique. Si, toutefois, il n'est pas le point rouge, La sélection est manuelle, le programme de votre choix, présélectionnée ci-dessus.

Avec le bouton 8, vous pouvez faire défiler à la fois, pour chacune des sorties de stimulation électromagnétique, parce que le paramètre doit être indépendante . Chaque fois que vous appuyez sur la touche 8, la lumière rouge se déplacer chaque de 5 pilotes qui se trouvent au-dessus du bouton. Et pour chacun d'eux, vous devez sélectionner le pouls intensité, avec les boutons 7 et 8, approprié à la sensibilité de la

clientèle. La machine dispose de 8 des niveaux d'intensité.

PROCÈS DE TRAITEMENT


1. Disposer le client sur une civière.
2. Placez pantalons spéciaux pour la présotherapie ou similaire.
3. Effectuer un massage pendant 15-20 min
(L'effet sera mieux si vous utilisez cosmétique spécifique Minceur)
4. Placez chacun des accessoires de couverture présotherapie . Séance Présotherapie pendant 15-30 minutes.
 - (1) Mettre la machine sur le bouton d'alimentation.
 - (2) vérifier que la fonction présotherapie est actif
 - (3) Arrêt de la fonction de stimulation électrique et chauffage infrarouge.
 - (4) la sélection du temps de travail
 - (5) Régler la pression de l'air et de travail, selon les conditions spécifiques de chaque client
 - (6) si vous souhaitez activer la fonction de chauffage Infrarouge
 - (7) à la fin du traitement, si vous le souhaitez vous pouvez faire une séance d'électro-stimulation pour environ 10 minutes.
 - (8) nous pouvons choisir manuel ou automatique. Quand le lumière rouge est sur le mode d'écran d'affichage, le mode travail est automatique
 - (9) La position des électrodes de patch, il devrait être placez toujours avec gel conducteur, et le début et la fin le muscle, pour éviter les blessures.
 - (10). Tout le traitement peut durer 90 minutes.



Guide Basique Du Massage



1. Appuyez sur la surface de la peau.

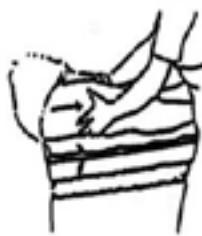

7. Mode de torsion avec les deux mains.



8. Méthode d'adhérence du côté centre dans la partie dos et le ventre.



9. Serrez le dos.

2. Procédé de massage autour du genou.



La position de patch l'électrode , comme représenté sur les images suivantes:

1> Épaule et le cou.



Image 1

Fonction: améliorer la circulation sanguine dans la région et la réduction de poids.

2> Hombro y brazo.



Imagen 2

Función: mejorar la circulación de la sangre en la zona y reducción de peso.



3> Ventre.



Image 3

Fonction: améliorer la circulation sanguine dans la région et la réduction de poids.

4> Cuisses.

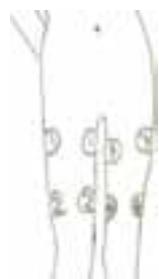


Image 4

Fonction: Tonifier la région et de la réduction de poids.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	Tension	Hz.
240/110V	350W	50/60Hz.
Poids	Machine principale: 29 Kg	Machine principal/ couverture
	Manta: 6,6 Kg	103 55 46 cm 91 41 26 cm

LISTE D'ACCESSOIRES D'EMBALLAGE

Nom	Unité d'article	Quantité	Remarques
Corps d'appareil	Groupe	1	
Tissue de minceur	Groupe	1	
Bandé de câble	patch	5	
Elastique bande	Groupe	1	
Couverture	Groupe	1	
65 Patch électrodes	partie	5	
95 Patch électrodes	partie	5	
Câble puissance	patch	1	
Fusible	partie	2	
Instructions	partie	1	

ATTENTION

1. Il est toujours conseillé d'utiliser un gel conducteur dans les électrodes plaquées à l'exercice passif pour obtenir de meilleurs résultats. L'intensité est ajusté selon les sensations qui vous dit le client. Il doit être réglé à faible progressivement.
Si vous ressentez de la douleur, vérifier que le patch est en contact parfait avec la peau.
2. Pour la fonction infrarouge, doit être réglé dans le niveau 8 au départ et une fois que le note client de chaleur, devrait permettre de réduire le niveau à 5 ou 6. Maintenir cette température.
3. Pendant tout la durée du traitement, vous devriez contacter le client, pour vérifier la température et de la puissance effectuer un ajustement correspondant.
4. Pendant le traitement, s'il vous plaît régler la machine en pause des traitements qui ne sont pas faite dans cette séance.
5. S'il vous plaît utilisez toujours culottes jetables ou stériliser correctement le consommable que utilisé pour chaque client.

DÉFAUT DE MONTAGE

Défaut de fonctionnement	Démontage
Il ne fonctionne pas lorsque allumage	vérifiez que il est bien connecté Vérifiez ça allumage
Pas d'électricité	Vérifiez que le câble d'Electro stimulation est bien connecté à la machine
	Vérifiez que le câble Electro stimulation est bien relié avec le câble
Corps de l'appareil ne réchauffe	Vérifiez le corps appareil est bien connecté à la machine
corps de l'appareil pas souffle	Vérifier la connecteur de commande plastique
Si vous êtes connecté à la machine	Lorsque le dispositif allumage réchauffé
	Il surchauffe, s'il vous plaît l'éteignez jusqu'à ce qu'il refroidisse Vérifiez si le ap. est Normal. (Examiner par un professionnel)

endroit où quelqu'un peut toucher le fil.

5. S'il vous plaît enlever le cordon d'alimentation après l'utiliser pour la sécurité
6. Ne pas mettre quoi que ce soit à l'intérieur de l'ordinateur, sinon peut provoquer un incendie dans l'appareil ou à télécharger pouvoir. Si quelque chose est entré dans l'ordinateur par accident, s'il vous plaît contacter le service technicien immédiatement de notre entreprise.
7. S'il vous plaît mettre l'appareil dans un endroit stable pour ne pas s'endommager.
8. Notre entreprise a le droit de changer les informations contenues dans ce manuel avant le communiquer.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

1. S'il vous plaît ne pas démonter ou tenter de le faire une autre opération, qui ne sont pas indiquées dans nos instructions. Toutes les réparations, ils doivent être faites par notre personnel technique.
2. S'il vous plaît ne pas utiliser l'ordinateur pendant que vous Il est près de l'eau ou de vos mains sont humides. Pas verser le liquide dessus.
3. S'il vous plaît retirer la fiche de la prise électrique lorsque lorsque l'une des situations décrites arriver à ci-dessous:
 - 1) L'équipe est mouillé
 - 2) L'équipe a une odeur de brûlé, ou fait un bruit étrange
 - 3) Le câble est cassé
 - 4) L'équipe présente cassure
4. S'il vous plaît ne pas modifier ou altérer les câbles, ne placez pas l'équipement dans un

PRESSOTERAPIA (ThermoSlim Body Shaper)



PRESSOTERAPIA - INFRAROSSO - ELETTROSTIMOLAZIONE

Linfodrenaggio / Cellulite / Adiposità localizzata / Vascolarizzazione / Tonificazione / Rassodamento / Riduzione ritenzione di liquidi / Eliminazione delle tossine L'apparecchiatura 3 in 1 Slimming Machine è la combinazione di tre diverse metodologie che si legano tra loro per ottenere risultati nettamente superiori ai singoli trattamenti.

Pressoterapia, infrarossi e stimolazione sono trattamenti ormai utilizzati da anni nei centri estetici con effetti visibili e concreti.

La combinazione delle tre metodologie fatte simultaneamente, migliora la qualità dei singoli trattamenti ottimizzando al massimo i tempi della seduta.

La cliente in una sola seduta di 30 minuti riceverà:

Pressoterapia, massaggio e drenaggio linfatico.

Infrarosso, riscaldamento generalizzato con conseguente aumento della temperatura corporea e quindi rilassamento muscolare, eliminazione delle tossine ed aumento del microcircolo.

Elettrostimolazione, riduzione delle cellule di grasso, tonificazione e vascolarizzazione dei tessuti.

Tonifica e rassoda la muscolatura del corpo, facilita ed incrementa l'eliminazione delle tossine, stimola il drenaggio linfatico, agisce contro gli inestetismi della cellulite e contrasta la ritenzione idrica.

Ulteriore effetto benefico per la persona è la piacevole sensazione di relax e benessere ricevuta durante il trattamento che persiste durante il proseguo dell'attività quotidiana.

TRATTAMENTI

Pressoterapia. E' l'equivalente di un massaggio linfatico manuale effettuato dall'estetista. L'effetto si basa su un'azione fisica che agisce sulla circolazione venosa e linfatica rendendola più efficiente e migliorando di conseguenza gli inestetismi estetici più frequenti: cellulite, adiposità localizzata, ritenzione di liquidi. La sequenza pressoria favorisce l'entrata del liquido interstiziale nei vasi linfatici e nell'albero circolatorio, attivandone e stimolandone il naturale percorso. La pressoterapia è di facile associazione ad altri trattamenti eseguiti in contemporanea (per aumentarne gli effetti) o singolarmente.

Infrarosso. Il sistema a infrarossi, con un effetto riscaldante, unito alla pressoterapia ed alla elettrostimolazione consente di tonificare e rassodare la massa muscolare, a scapito di quella adiposa.


Riduce la quantità di grasso corporeo e soprattutto il grasso localizzato. Migliora il metabolismo, l'organismo diventa più efficiente nel consumare calorie e grasso. Migliora quindi l'aspetto estetico e la capacità dei muscoli di sfruttare l'adipe quale fonte energetica.

Elettrostimolazione. La stimolazione muscolare ci aiuta a difendere la vitalità e la bellezza del nostro corpo stimolando e sviluppando la tonicità del nostro apparato muscolare.

Il risultato è un aspetto più piacevole, una migliore forma fisica e una migliorata agilità nei movimenti.

L' elettrostimolazione mirata ci permette di andare a risvegliare quei distretti muscolari non utilizzati (o utilizzato poco) da tempo che provocano lassità ad effetto cascata. Permette inoltre di combattere la cellulite e di agire sul sistema vascolare stimolando la circolazione linfatica.

PANELLO DI CONTROLLO

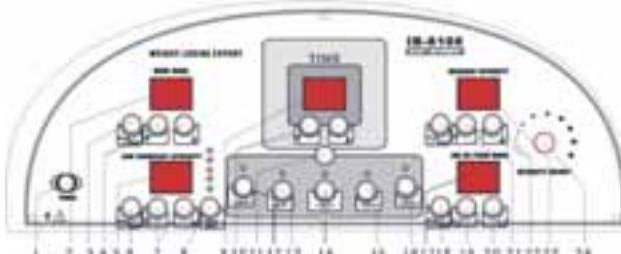

1. Tasto accendere/ spengere la macchina
2. Panello Visualizzazione Modo Elletrostimulatore
3. Tasto accendere/spengere la funzione elletrostimulazione.
4. Tasto per la scelta tipo di programma dell'elletrostimulatore.
5. Panello visualizzazione della intensità dell'elletrostimulatore.
6. Tasto ON/OFF Intensità dell'elletrostimulatore.
7. Tasti per la scelta dell'intensità dell'elletrostimulatore
8. Tasto per selezionare le uscite dell'elletrostimulatore. (Ogni puntino rosso corrisponde ad una diversa uscita , partendo dall'alto, con cui si lavora).
9. Panello visualizzazione del tempo.
10. Tasti per selezionare il tempo di lavoro.
11. Tasto per iniziare a lavorare una volta scelto il tempo, sia quale sia la funzione selezionata.
- 12-16. Tasti per aprire le connessione ai elletrodi per lavorare con l'elletrostimulazione.
17. Panello visualizzazione del programma di PRESSOTERAPIA scelto.
18. Tasto ON/OFF Programma Massaggio PRESSOTERAPIA
19. -20. Tasto per selezionare il modo d'uscita d'aria della PRESSOTERAPIA
21. Tasto On/OFF Funzione Infrarossi
22. Tasto per selezionare l'intensità dei Infrarossi
23. Panello visualizzazione Funzione Infrarossi
24. Tasto regolatore dell'intensità dell'uscita dell'aria.


CAUTELA

Verifichi che non manca nessun pezzo o accessorio.

- Prima di mettere l'apparato in funzionamento, assicurasi che il voltaggio di entrata sta dentro il rango permesso. Se il voltaggio è superiore o inferiore al permesso, il funzionamento non potrebbe essere corretto o perfino potrebbe guastarsi.
- Quando l'apparato non si usa, spenga l'interruttore e staccare la spina dalla corrente elettrica.
- Davanti a qualunque problema, contatti col nostro distributore.

PRESSOTERAPIA

Per cominciare ad utilizzare la macchina, deve connettere prima tutti i alacci alla coperta termica: Sia quelli per l'aria che quelli per gli infrarossi. Sono tutti numerati.

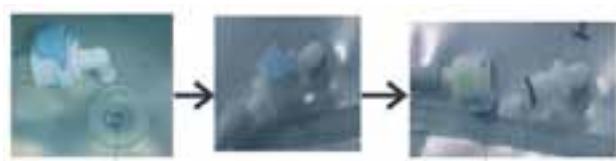

I connettori per l'aria sono quelli che hanno la testina bianca a modo di piccolo rubinetto: introduca queste testine bianche nei buchi numerati corrispondenti della termocoperta.


Il bottone azzurro serve per ritirare le testine dell'uscite d'aria, pressione per sbloccare e tiri della testina per toglierlo.

I connettori con la testina metallica corrispondono agli infrarossi, colleghi ognuno alla termocoperta, sono anche numerati per la sua comodità.

Una volta connessi tutti i allacci(Gambe, Bracci, Fascia, Piedi) alla termocoperta si devono connettere alla macchina i allacci della termocoperta .




Una volta si sono fatte tutte le connessioni della termocoperta con i accessori e con la macchina, attaccare la spina alla corrente elettrica.

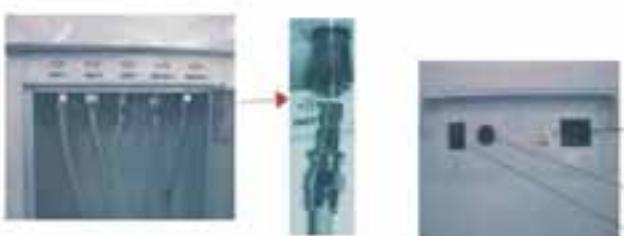

Questi allacci hanno la testina metallica e si devono connettere nelle connessioni specifiche che si trovano dentro le sportelle laterali della macchina. Sono numerati per la sua comodità. Fare pressione per incasare i allacci.

FUNZIONAMENTO PRESSOTERAPIA

- (1) - Bracci.
- (2) - Fascia.
- (3) - Gambe.
- (4) - Coperta.
- (5) - Piedi.
- (6) - Infrarossi.
- (7) - Tubi d'aria.

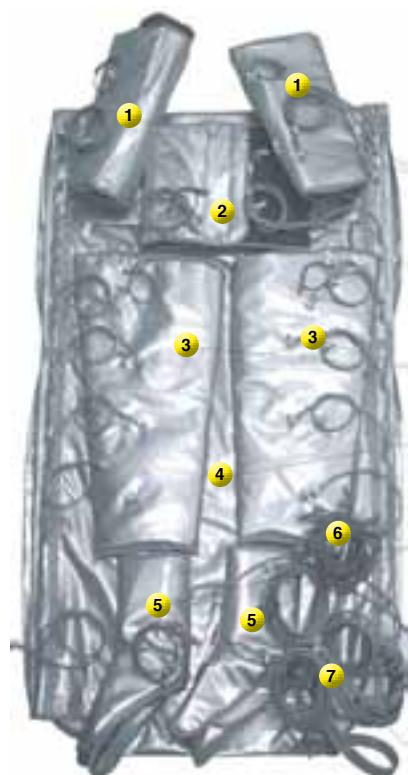

AIR DE-TOXIN MODE

Premere il tasto 1. ON/OFF



Si accendono tutte le luce della macchina.

Premendo i tasti On/Off delle diverse funzione, si accendono/spengono.


Per iniziare la pressoterapia si deve accendere la funzione corrispondente Tasto 18, in maniera che il puntino rosso del pannello è acceso , indicando che questa funzione è in uso. Air De- Toxin Mode .

Selezionare con i tasti 19-20 il modo massaggio d'aria. 13-35 regolare l'intensità desiderata



Selezionare l'intensità dell' aria Tasto 24.

FUNZIONAMENTO DEI INFRAROSSI

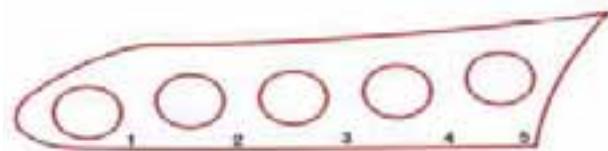

1 2 3 4 5.

Si possono usare insieme alla PRESSOTERAPIA. Si devono collegare i fili indicati della termocoperta ai allacci 1-5 del frontale della macchina (quelli a



destra). Premere il tasto 21 per accendere questa funzione.

Il puntino Rosso indica che è in uso.

Selezionare l'intensità degli infrarossi con i tasti 22.

Selezionare il tempo ad operare . Tasto 10 Premere il Tasto 11 per iniziare a lavorare. Si gonfiano tutti i accessori e la termoterapia è in funzionamento.

ELLETROSTIMOLAZIONE

Collegare i elettrodi che si volgliono usare ai fili.



Collegare i fili alle uscite frontale indicate.



5 4 3 2 1.

Premere il tasto 3 per selezionare la funzione. Il puntino rosso indica che è in uso.

Premere il tasto 4 per selezionare il programma di stimolazione più conveniente:

1. Dimagrimento

2. Anticellulitico

3. Tonificante

4. massaggio Linfodrenante


5. Rilassante Muscolare

Selezionare l'intensità della ellettricità. Pannello 5.

Premere il taso 7 per selezionare l'intensità dell'elletrostimolatore.

Premere il tasto 8 per selezionare le uscite con le quali si vuole lavorare: Di alto in basso si accende un puntino rosso : In posizione più alta lavora con 1 uscita , mentre che in posizione più bassa si lavora con le 5 uscite.

Premere i Tasti 9-16 per aprire la stimolazione.

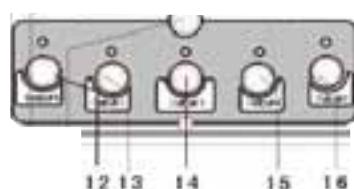

I connettori, si devono applicare direttamente sulla pelle e per un migliore funzionamento e conservazione si consiglia d'usare il gel conduttore per ultrasuoni.

DEUTSCHLAND

THERMOSLIM BODY SHAPER



DRUCKTHERAPEUTISCHE FUNKTIONEN

Dieses Gerät wurde Erkenntnissen der Bionikforschung entsprechend mit größter Sorgfalt entwickelt. Es vereint drei Funktionen: Fettauflösung, Lymphdrainage sowie die hautfestigende Magnettherapie, und erzielt mit dem Einsatz von Hightechverfahren erstaunliche Resultate.

GEWICHTSABNAHME


- Niedrigfrequenzstrom kann den Muskel so weit stimulieren, dass er einen Fremitus (leichtes Vibrieren) und eine Kontraktion erfährt, die eine hohe Menge an Fettzellen zersetzen können.
- Die auf die genauen Stellen aufgesetzten Elektroden können die Funktion des internen Organismus anregen, den Stoffwechsel beschleunigen und somit die Bildung neuer Fettzellen verhindern.
- Die Infrarotstrahlen dringen in die Zellstruktur des Fettgewebes ein und entwickeln eine hohe Wärmeenergie, die den Blutkreislauf und die Lymphdrüsen anregt. Das hat zur Folge, dass der Stoffwechsel gefördert, der biochemische Prozess beschleunigt, AIP konsumiert und ein Katabolismus der Fettzellen hervorgerufen wird, was eine Reduzierung des Fettes begünstigt.
- Luftkissen, die in regelmäßigen Abständen an- und abschwellen und ihren Druck ständig verändern, zerteilen die Fettzellen und zerstören sie.

HAUTVERSCHÖNERUNG

Wenn schwache bionische Elektrizität die in der Epidermis endenden Sinnesnerven anregt, wird schlaffe Haut wieder straff und elastisch.

ENTSPANNENDE WIRKUNG, DIE DAS IMMUNSYSTEM STÄRKT

- Die Durchblutung beschleunigt sich und die Muskeln entspannen sich aufgrund der im Körper arbeitenden Mikroelektrizität.
- Die durch die Infrarotstrahlen entstehende Wärme vermindert die Spannung in den Muskeln und entspannt sie.
- Das Gerät fördert die Aufnahme von Arzneimitteln und erhöht deren Heilkraft.
- Es reduziert Entzündungen, beschleunigt die Heilung und begünstigt den Schlaf.

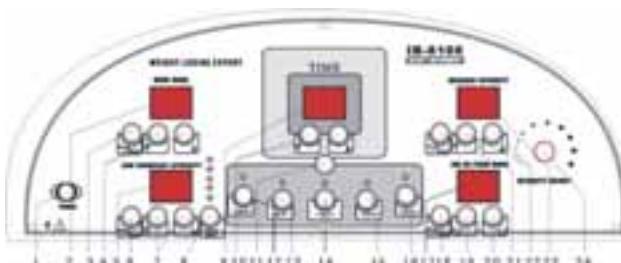

1. Einschalten
2. Wellenmodus-Display
3. Einstelltaste für manuellen/automatischen Betrieb
4. Regulierung des Wellenmodus
5. Display für Elektrostimulationsintensität
6. Elektrostimulation (EMS) Start / Stop
7. Einstelltaste für die Intensität der Elektrostimulation
8. Elektrostimulationstaste (5 Outputs)
9. Betriebszeit - Display
10. Betriebszeit einstellen
11. Betrieb Start / Stop
12. Starttaste für den linken Arm
13. Starttaste für den rechten Arm
14. Starttaste für die Taille
15. Starttaste für das linke Bein
16. Starttaste für das rechte Bein
17. Display für Frequenz / Luftdruckmodus
18. Luftdruck Start / Stop
19. Luftdruckmodus wählen
20. Luftdruckfrequenz einstellen
21. Infrarotheizung Start / Stop
22. Infrarotheizung regulieren
23. Display für Infrarotheizung
24. Luftdruckintensität regulieren

Anmerkung: Bei Benutzung des Luftdrucks, können Sie eine dieser Tasten drücken und die Überzieher für den rechten und den linken Arm blasen sich gleichzeitig auf.


Wenn Sie drücken, blasen sich die Überzieher für den rechten und den linken Fuß gleichzeitig auf.

Wenn Sie drücken, blasen sich die Überzieher für das rechte und das linke Bein gleichzeitig auf.


KONTROLLSCHIRM



Linker output für elektrostimulation

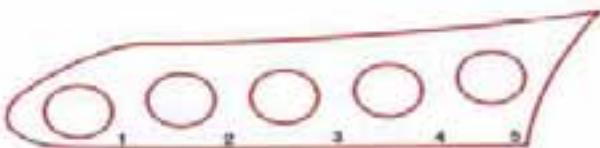

Rechter output für elektrostimulation.

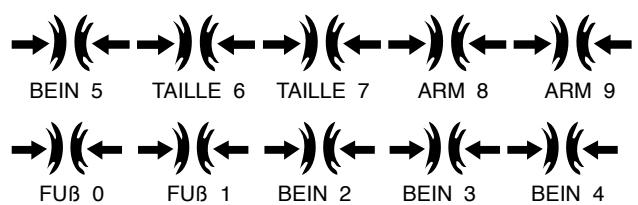

Output für Entschlackungsluftdruck:

Output für Fußüberzieher: FUß 0 und 1.

Output für Beinüberzieher: BEIN 2, 4,3, 5.

Output für Taillenband: TAILLE 6 und 7.

Output für Armüberzieher: ARM 8 und 9.

(1) - Armüberzieher

Luftdruck Output 8/9

Infrarotwärme-Output 1/2

(2) - Taillenband

Luftdruck Output 6/7

Infrarotwärme Output 3

(3) - Beinüberzieher

Luftdruck Output 2/3/4/5

Infrarotwärme Output 4/5

(4) - Decke.

(5) - Fußüberzieher

Luftdruck Output 0/1


(6) - Infrarotheizung

Stecker.

(7) - Luftdruckschlauch

an den Output angeschlossen

* Schließen Sie die Schläuche bitte an die richtige Nummer an.

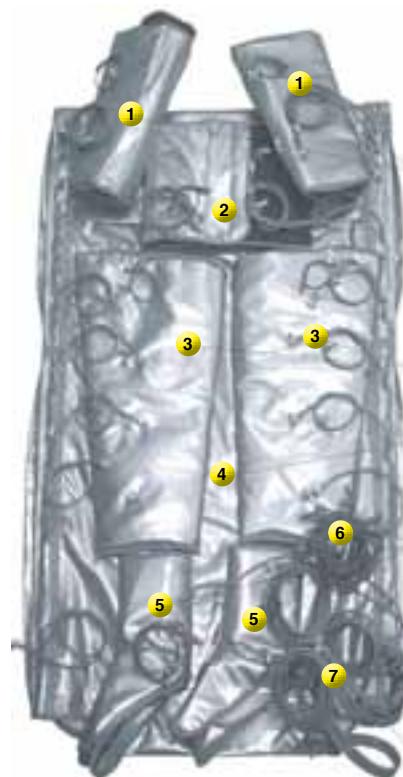

STECKSCHEMA FÜR DIE LUFTDRUCKSCHLÄUCHE



Hier einstecken



Ziehen Sie den Stecker mit einem Druck auf den auf dem Foto gezeigten blauen Punkt heraus

STECKSCHEMA FÜR DAS ELEKTROSTIMULIERUNGSKISSEN



Elektrostimulierungskabel
(an Output anschließen)




Elektrostimulierungskissen
(auf der Haut anbringen)



Elektrostimulierungskissen mit Kabel

STECKSCHEMA FÜR DIE INFRAROTHEIZUNG

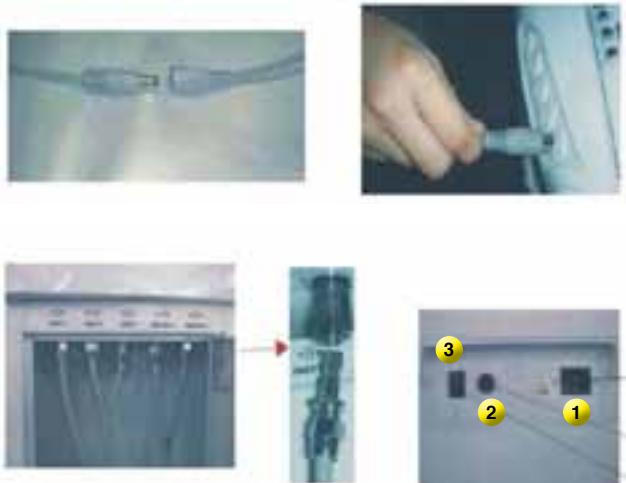

BETRIEBSANWEISUNGEN

1. Prüfen Sie das Stromkabel und schließen Sie es an.
2. Drücken Sie die Power-Taste. Das Gerät beginnt zu arbeiten.
3. Schließen Sie den Stecker an die Überzieher bzw. an das Elektrodenkissen an.
Um sicher zu gehen, dass alles stimmt, zeigt der Display "0"
4. Zwei Arten, die Überzieher zu tragen:
 - i. Bringen Sie die Elektrodenkissen an den Körperstellen an, mit denen Sie nicht zufrieden sind. Ziehen Sie dann die Überzieher für Taille, Arme und Beine an.
 - ii. Wickeln Sie bitte die Schutzfolie um und ziehen Sie dann die Überzieher an. Nach 30 Minuten die Schutzfolie entfernen und das Elektrodenkissen anbringen.
5. Drücken Sie die POWER-Taste auf dem Kontrollschild.
6. Zeit einstellen: Je nach Betriebszeit auf der Maschine den Knopf 10 drücken. Die Mindestzeit liegt bei einer Minute und die maximale Zeit bei 60 Minuten. Angebracht sind normalerweise 30 bis 60 Minuten.
7. Ferninfrarot

Ferninfrarot regulieren: Drücken Sie Taste 20 und 21, um die Intensität der Heizung zu regulieren.

Es gibt acht Stufen. Je nach Wunsch des Klienten drücken und die entsprechende Intensität einstellen.

8. Anmerkung: Da die Haut bei jeder Person anders ist, wählen Sie bitte nicht die hohe Intensität. Um Verbrennungen zu vermeiden, wickeln Sie bitte ein feuchtes Handtuch um, bevor Sie die Überzieher anziehen. Solange die Maschine in Betrieb ist, blinkt rechts unter dem Kontrollschild ein kleines rotes Licht.
 9. Regulierung des Entschlackungs-Luftdrucks: Es gibt drei Arten von Luftdruck:
 - (1) Luftdruck von den Gliedmaßen zum Zentrum
 - (2) Luftdruck vom Zentrum zu den Gliedmaßen
 - (3) Beide Luftdruckarten beginnen gemeinsam. Für jeden Modus stehen fünf Behandlungszeiten zur Auswahl. Drücken Sie Start/Pause und die Behandlung beginnt.
 10. Elektrostimulation
 - (1) Output wählen: Um den Output zu wählen, bitte Start/Pause von 12-16 drücken. Damit können Sie jeden Output nacheinander oder zusammen mit jedem gewünschten wählen. Wenn Sie alle 5 Outputs gemeinsam in Betrieb haben wollen, drücken Sie bitte Knopf 11.
 - (2) Niedrigfrequenz regulieren: Drücken Sie bitte Knopf 7, um die Intensität der Niedrigfrequenz einzustellen. Dafür gibt es 8 Stufen. Drücken Sie Knopf 8, um den Output zu wählen. Sie können für jedes Mal einen Output wählen. Drücken Sie Start/Pause. Die Behandlung beginnt. Um die Intensität einzustellen bitte und drücken.
 - (3) Wellenart wählen: Drücken Sie Start/Pause, das Gerät beginnt zu arbeiten oder macht eine Pause. Drücken Sie Manuell/Automatisch, um einen vom Kunden gewünschten Modus zu wählen. Beim automatischen Modus blinkt ein rotes Licht. Beim manuellen Modus stehen 5 Möglichkeiten zur Auswahl.
- 1> Programm Eins:** Niedrigfrequenz für die Einwirkung auf die Fettzelle, um das Fett zu reduzieren und so Gewicht zu verlieren. Ist für jeden Körperteil geeignet.
- 2> Programm Zwei:** Bewegung für die nachhaltige Gewichtsabnahme. Sie holt das Fett aus



dem tiefer sitzenden Gewebe. Angebracht bei tiefer sitzende Fettschichten.

3> Programm Drei: Muskeltraining für Gewichtsabnahme. Ist angebracht bei Cellulite mit der Nebenwirkung einer Gewebestraffung.

4> Programm Vier: Kontinuierliche Welle für die Verbesserung des Lymphdrüsensystems und die Reduzierung des Fetts in der Fettzelle. Angebracht bei Blockierungen der Lymphdrüsen mit der ausgezeichneten Nebenwirkung einer Entgiftung.

5> Programm Fünf: Impulswelle für die Entlastung von Muskeln und eine Verbesserung der Fettbeseitigung.



2. Massage um die Knie herum.



3. Tiefdruck-Methode.

4. Wring-Methode.



5. Klopft-Methode.

6. Hack-Methode.




7. Wring-Methode mit zwei Händen.



8. Greif-Methode von der Mitte zur Seite für Rücken und Bauch.

Elementarer massageführer

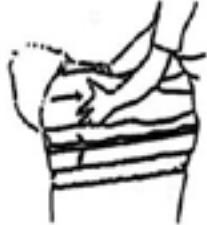

1. Hautoberfläche drücken.



9. Druck auf den Rücken.



4. 15 bis 30 Minuten Luftdruckmassage.

(1) Wickeln Sie die zu behandelnde Person in Schutzfolie ein und ziehen Sie dann die Überzieher an. Sie sollte sich dann auf die Gesichtsbehandlungsliege legen.

(2) Starten Sie das Gerät mit einem Druck auf die Power-T. . (Siehe Schematafel 1).

(3) Output von Elektrostimulierung und Infrarotheizung auf Pause stellen. (Siehe Schematafel 6, 21).

(4) Drücken Sie Start/Stop-Taste . (Siehe Schematafel 11).

(5) Regulieren Sie den Luftdruck und stellen Sie die Zeit ein Sie sollten jeder Person angepasst werden. (Siehe Schematafel 17, 18, 19, 20, 24).

5. 20 – 30 Minuten Infrarotwärme.

(1) Wickeln Sie die zu behandelnde Person in ein nasses Handtuch. Dann sollte sie die Überzieher anziehen und sich auf die Gesichtsbehandlungsliege legen.

(2) Starten Sie das Gerät mit einem Druck auf die Power-Taste . . (Siehe Schematafel 1).

(3) Output von Elektrostimulierung und Luftdruck auf Pause stellen. (Siehe Schematafel 6, 18).

(4) Drücken Sie die Start/Stop-Taste. (Siehe Schematafel 11).

(5) Stellen Sie die Wärme auf Stufe 8 , und wenn die entsprechende Temperatur erreicht ist, schalten sie auf Stufe 5/6 zurück, um die Temperatur zu halten. (Siehe Schematafel 21, 22, 23).

6. 10 Minuten Elektrostimulierung.

(1) Starten Sie das Gerät mit einem Druck auf die Power-Taste . (Siehe Schematafel 1).

(2) Output von Infrarotheizung und Luftdruck auf Pause stellen. (Siehe Schematafel 18,21).

(3) Drücken Sie die Start/Stop-Taste . (Siehe Schematafel 11).

(4) Wählen Sie mit dem Knopf den gewünschten Output und regulieren Sie dann die Intensität mit dem Knopf (Siehe Schematafel 7).

(5) Für die Wahl des Modus können wir die manuelle oder die automatische Einstellung wählen. Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet das, der ma-

nuelle Modus ist in Betrieb, . Andernfalls ist der automatisch Modus eingestellt. Der manuelle Modus hat 5 Stufen. (Siehe Schematafel 2, 3, 4).

(6) Stellen für das Elektrodenkissen;

1> Bild eins: für Schulter und Nacken.



Bild 1

Wirkung: Verbesserung der Durchblutung in der Schulter und der Nackenregion.

Beseitigung von Fettpolstern an Schulter und Nacken sowie Entspannung.

2> Bild zwei: für Schulter und Arm.



Bild 2

Wirkung: Verbesserung der Durchblutung in Schulter und Arm.

Beseitigung von Fettpolstern am Arm.

3> Bild drei: für den Bauch



Bild 3

Wirkung: Verbesserung der Durchblutung in der Bauchregion. Beseitigung von Fettpolstern am Bauch;

4> Bild vier: für die Oberschenkel



Bild 4

Wirkung: Anspannung der Oberschenkel. Gewichtsabnahme an den Oberschenkeln.

7. Wir können den Behandlungsmodus Luftdruck/ Infrarotwärme/Elektrostimulierung wählen.
8. Nach der Behandlung erneut duschen.
9. Die gesamte Behandlung sollte 90 Minuten dauern

ANDERE VORSCHLÄGE FÜR DIE LUFTDRUCKBEHANDLUNG

1. Gewichtabnahme an den Beinen
 - (i) Ziehen Sie die Überzieher für Füße und Beine an.
 - (ii) Drücken Sie Knopf . (Siehe Schema 15).
 - (iii) Stellen Sie den Luftdruckmodus und die Frequenz mit ein. (Siehe Schematafel 17,18,19,20).
2. Zur Entspannung des ganzen Körpers
 - (1) Ziehen Sie alle Überzieher an.
 - (2) Drücken Sie die Knöpfe

(3) Regulieren Sie Luftdruckmodus und Zeit mit



(Siehe Schematafel 17,18,19,20).

3. Zur Entschlackung

(1) Alle Überzieher anziehen.



(2) Drücken Sie die Knöpfe

(3) Regulieren Sie Luftdruckmodus und Frequenz



mit . (Siehe Schematafel 15, 16, 17,18).

Anmerkung: Sollte die Intensität für den Kunden zu stark sein, können sie diese mit dem Knopf



regulieren

(Siehe Schematafel 24).

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Massieren Sie den Körper, bevor Sie das Elektrodenkissen anlegen, mit kosmetischem Gewebebestraffer (Gel oder Öl), um eine bessere Wirkung zu erzielen. Die Intensität der Behandlung sollte jedem Kunden angepasst werden. Die Temperatur sollte nach und nach erhöht werden. Wenn Schmerzen auftreten, prüfen Sie bitte, ob das Elektrodenkissen voll an der Haut aufliegt.
2. Bei Behandlung mit Ferninfrarot sollten Sie zunächst die Stufe 8 einstellen. Empfindet der Kunde das als zu heiß, schalten Sie auf Stufe 5 bis 6 zurück. Halten Sie diese Temperatur. Den Winter/Sommer-Schalter über der Fußplatte betätigt man, um die Temperatur der jeweiligen Jahreszeit und Raumtemperatur anzupassen.
3. Während der Behandlung sollte die behandelnde Person mit dem Kunden sprechen, stets die Temperatur sowie den Schweißausstoß kontrollieren und die entsprechenden Regulierungen vornehmen.
4. Wenn Sie bestimmte Behandlungen unterbrechen wollen, stellen Sie das Gerät auf Pause.
5. Sterilisieren sie Überzieher und Elektrodenkissen nach der Behandlung mit 50%igem Alkohol.

TECHNISCHE DATEN

Potenz	Spannung	Hz.
240/110V	350W	50/60Hz.
Gewicht	Gewicht Hauptgeräte: 29 Kg	Grösse Hauptgerät / Decke
	Decke: 6,6 Kg	103 55 46 cm 91 41 26 cm

BEHEBUNG EINFACHER PROBLEME

Problem	Behebung
Das Gerät ist eingeschaltet, aber arbeitet nicht	Prüfen Sie, ob das Stromkabel fest sitzt
	Prüfen Sie, ob der Startschalter gedrückt ist
Elektrodenkissen funktioniert nicht	Prüfen Sie, ob das Kissen mit dem Gerät verbunden ist
	Prüfen Sie, ob das Kissenkabel gut sitzt
Überzieher werden nicht warm	Prüfen Sie, ob die Überzieher mit dem Gerät verbunden sind
Die Überzieher blasen sich nicht auf	Prüfen Sie, ob die Plastikstecker mit dem Gerät verbunden sind
Das Gerät überhitzt, wenn es in Betrieb ist	Zu lange in Betrieb. Bitte abschalten und abkühlen lassen.
	Die Stromversorgung von einem Experten prüfen lassen

PACKLISTE DES ZUBEHÖRS

Art. Bezeichnung	Einheit	Menge	Anmerkung
Mainframe	Set	1	
Überzieher	Set	1	
Elektrodenkissenkabel	Strip	5	
Elastikband	Set	1	
Decke	Set	1	
Elektrodenkissen	Stück	5	
Elektrodenkissen	Stück	5	
Stromanschlußkabel	Strip	1	
Sicherungen	Stück	2	
Bedienungsanleitung	Stück	1	

WICHTIGE ANWEISUNGEN ZUR SICHERHEIT

1. Nehmen Sie das Equipment bitte nicht auseinander. Versuchen Sie auch keine Operation, die in unserer Bedienungsanleitung nicht angegeben ist. Alle Reparaturen dürfen nur von zugelassenem professionellen Personal vorgenommen werden.
2. Handhaben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder mit nassen Händen. Achten Sie darauf, dass es nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
3. Ziehen Sie bitte bei folgenden Umständen das Stromkabel aus der Steckdose und setzen Sie sich mit professionellem Wartungspersonal in Verbindung:
 - 1> Die Anlage kam mit Flüssigkeit in Berührung
 - 2> Das Gerät riecht seltsam, raucht oder macht ein lautes und ungewöhnliches Geräusch
 - 3> Das Kabel ist rissig
 - 4> Das Gerät ist umgefallen und zerbrochen



4. Stellen Sie bitte nichts auf die Kabel, und stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, wo die Kabel mit Füßen getreten werden können.
5. Ziehen Sie das Stromkabel zu Ihrer Sicherheit nach Benutzung des Geräts aus der Steckdose.
6. Stecken Sie nichts in das Gerät. Es könnte ein Brand oder ein Stromschlag entstehen. Sollte etwas in das Gerät geraten, holen Sie es bitte nicht selbst heraus und setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Händler oder mit unserem Unternehmen in Verbindung.
7. Stellen Sie das Gerät bitte nicht auf eine unsichere Unterlage, wo es umfallen und beschädigt werden könnte.
8. Unsere Firma behält sich das Recht vor, die Information dieser Anleitung ohne vorherige Benachrichtigung zu verändern und die Beschreibungen zu verbessern.

PORTUGUÊS

PRESSOTERAPIA (Thermo Slim Body Shaper)



FUNÇÕES

Este aparelho foi cuidadosamente desenhado de acordo com a biônica investigação, que combina as funções das diferentes gorduras, de gorduras dissolvidas, linfática drebagem, tratamento magnético da pele em uma empresa de alta tecnologia utilizando os meios para massagens, electroterapia e fazer pressão para conseguir na terapia um efeito significativo.

Electricidade de baixa frequência pode estimular o músculo para fremitus e retrair, que podem descompor grande quantidade de células com gordura, almofadas elécticas colocadas nos pontos, que podem ajustar a função do orgão interior e limitar a entrada de gordura, com o fim de acelerar o metabolismo.

Raios infravermelhos: permitem uma acção directa sobre a estrutura de gordura, o que pode libertar uma grande quantidade de energia térmica, acelerar a circulação do sangue linfático e promover o metabolismo, a velocidade de reacção bioquímica;

AIP, consumir, fazer catabolismo das células gordurosas, em grande parte a diminuição da gordura.

As bolsas de ar se inflão e esvaziam com regularidade, é necessário trocar continuamente a pressão do ar, o que pode apagar, dissociar, as células de gordura.

Envelhecimento do corpo e pele

Quando uma débil corrente biônica estimula os nervos sensoriais que acabam na epiderme, a pele a sua excelente elasticidade.

Relaxa e estimula a imunidade

A circulação do sangue acelera-se e diminui o músculo depois de micro obras de electricidade no corpo.


Calor gerado por energia de raios de infravermelhos podem diminuir a tensão muscular, relaxa o músculo.

Líder em Medicina

Estimula a absorção do medicamento para reforçar o efeito curativo.

Outras funções

Promover a cura, a diminuição da inflamação, manter a calma e dormir em paz, etc.

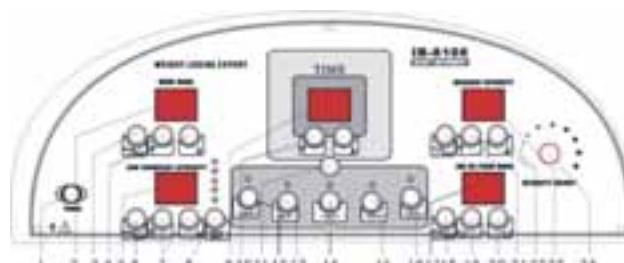

1. Ligado
2. Ola de visualização do modo
3. Manual/ ajustar ou trocar
4. Ajustar o modo de onda


5. Electro estimulação de intensidade no ecrã
6. Electro Estimulação de marcha/ parado
7. Ajustar a intensidade da estimulação eléctrica
8. Electro estimulação do interruptor de saída (5 produtos)
9. O tempo de trabalho do visor
10. Justar o tempo de trablho
11. Saída de marcha/ parado
12. Braço esquerdo de saída do interruptor
13. Braço direito de saída do interruptor
14. Interruptor de saída da sintura
15. Saída da perna esquerda interruptor
16. Saída da perna direita trocar
17. Pressão do ar de modo a visualisar as frequências
18. Pressão do ar de marcha/ parado
19. Seleccionar o modo de pressão do ar
20. Ajustar a pressão do ar frequênciia
21. O aquecimento pelos infravermelhos marcha/ parados
22. Ajustar a intensidade do aquecimento por infravermelhos
23. O aquecimento por infravermelhosno visor
24. Ajustar a intensidade da pressão do ar.

Observações: quando se utiliza a pressão do ar, pressione qualquer botão , e logo o esquerdo e direito de armas infla-se o mesmo tempo.


Pressione, , todos da esquerda e da directa inflam-se os pés o mesmo tempo.

Pressione , a esquerda e direita inflam-se as pernas o mesmo tempo.


ECRÃ DE CONTROL

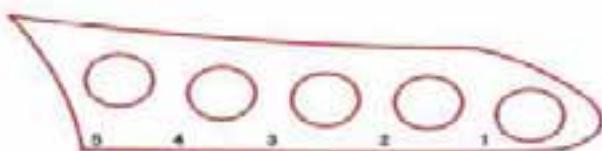

Esquerda saída de elctrodos de estimulação.

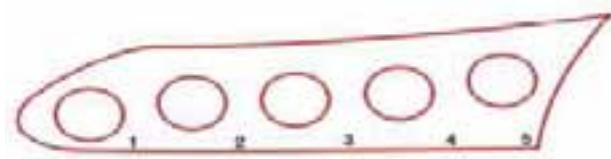

Direita saída de electrodos de estimulação.

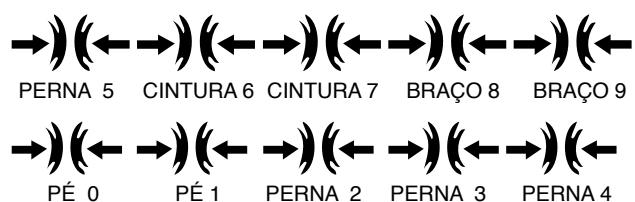

Saída da pressão do ar das toxinas:

Saída sobrante do ar, pés: PÉ 0 y 1.

Saída sobrante do ar, pernas: PERNAS 2, 4,3, 5.

Saída de sobrante de ar, cintura : CINTURA 6 y 7.

Saída de sobrantes de ar, braços: BRAÇO 8 Y 9.

(1) - Recambio de braço

Saída de ar de pressão 8/9

Saída de aquecimento de infravermelhos 1/2.

(2) - Recambio de cintura

Saída de ar de pressão 6/7

Saída de aquecimento de infravermelhos 3.

(3) - Recambio de pernas

Saída de ar de pressão 2/3/4/5

Saída de aquecimento de infravermelhos 4/5.

(4) - Manta.

(5) - Recambio de pés

Saída de ar de pressão 0/1.

(6) - Aquecimento por infravermelhos conector.

(7) - Tubo de pressão de ar.

Ligado com a saída.

* Por favor ligue os tubos com o número correcto.


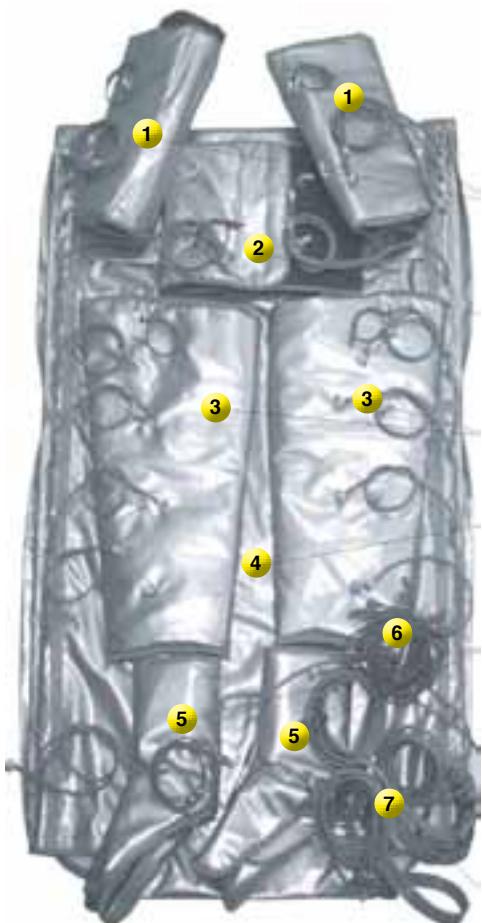



DIAGRAMA DE LIGAÇÃO A PRESSÃO DO AR

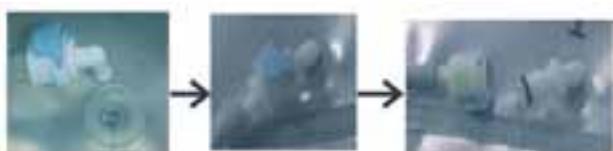

Ligue aqui

Tire o conector presionando o ponto azul, que se ve na foto.

PARCHE DE ELECTRO ESTIMULAÇÃO LIGAR O DIAGRAMA

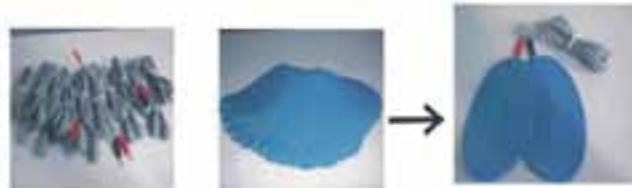


Cabo de electro estimulação cabo (Ligar a saída)

Parche de electro estimulação (Colocar na pele)

Electro estimulação parche com

DIAGRAMA DE CONEÇÃO DE AQUECIMENTO DOS INFRAVERMELHOS

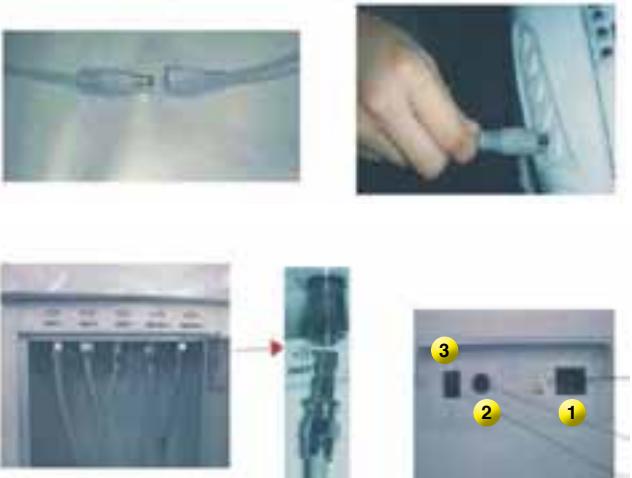

Esquema de ligação.

1 - Tomada de corrente eléctrica.
2 - Fusivel
3 - Interruptor de ligado.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

- Revise e ligue os cabos de electricidade
- Ligue o botão de ligar, a máquina começará a trabalhar
- Ligue o puerto de saída a roupa e o parche de electrodos de emagrecimento respectivamente. Para assegurar-se, o visor mostra-lhe como "0".
- O usar o método de emagrecimento e a roupa com electrodos parches:
 - Coloque os electodos parches em ambas partes, caolocar na roupa para emagrecer a cintura, braços e pernas.

ii. Por favor envolva a conservação as películas e logo coloque o emagrecimento rapa, em 30 minutos, tirar a película e colocar o electrodo de parche nas partes.

5. Pulse o botão POWER no painel de controlo.
6. Ajustar Hora: segundo o tempo de trabalho para ajustar a hora no botão da máquina 10. O tempo mínimo é de um minuto e o tempo máximo é de 60 minutos. Normalmente, o tempo adequado é de 30 a 60 minutos.
7. Infravermelhos distantes
8. Ajustar a medida de infravermelhos: Pressione o botão 20 e 21 para ajustar a intensidade de infravermelhos distantes. Existem oito níveis. De acordo com o que solicita o cliente pressione "?" e "@", selecione uma intensidade adequada.

Nota: Devido a natureza da pele é diferente para todos, por favor não selecionar a alta intensidade. Para evitar a queima, por favor, antes de envolver a toalha molhada colocar sobre a roupa de alegaçamento. Se mostra como a máquina está a trabalhar enquanto que pequena mancha vermelha brilha com o marco direito com os vidros líquidos expor.

9. Pressão de ar da toxina de ajuste modo: existem três modos de ar de pressão:
 - (1) A pressão do ar desde o centro as extremitades partes;
 - (2) A pressão do ar desde o centro até as partes;
 - (3) Pressão do ar começa juntos, Para cada um deles, existem cinco selecionados de tratamento de tempo. Pulse início/ Pausa, funciona.

10. Electrodo de estimulação

(1) Selecionar a saída: para seleccionar a saída, por favor pulse início / pausa de 12-16. Esta é a forma de seleccionar a saída de um em um ou em conjunto com qualquer pessoa que o deseje. 5 produtos se espera para operar a um tempo, por favor, pulse o botão 11.

(2) Ajuste de baixa frequência: 7 por favor, pulse o botão para ajustar a intensidade da baixa frequência. Existem 8 níveis para o mesmo. 8 Pulse o botão para seleccionar a saída. Se pode estabelecer uma saída para um tempo. Pulse iniciar / Pausa botão, começa a trabalhar. Ajustar a intensidade, por favor pressione o botão "?" e "@".

(3) Selecione o modo de onda: pulse início/ Pausa, a máquina inicia-se ou detem-se para o trabalho. Prensa manual / automática para seleccionar o modo adequado de acordo com o que os cliente solicita. Em estado automático, a luz vermelha é cintilante. Na outra parte, o manual, que tem cinco modos para escolher.

1> um programa: o efeito de baixa frequência nas células de gordura e reduzir a gordura das células e, a continuação, alcançar a resultado de perder peso. É adequado para qualquer parte do corpo.

2> Programa dois: Movimento pela profunda perda de peso. Isto faz com que a gordura passe a capa profunda. Seja adequado para profunda capa de gordura.

3> Programa três: exercício muscular para perder peso. São adequados para colmena como a gordura e com o excelente efeito de apertar.

4> Programa quatro: a onda continua para melhorar a circulação e ajuda reduzir a gordura das células. São adequados para bloqueio de ganglios linfáticos pratica com o evidente efeito de toxina.

5> Programa cinco: Impulso de onda de liberar a músculo e melhorar a gordura de movimento.

TABÚ

As seguintes pessoas proíbe-se o instrumento de trato:

1. As pessoas com hemofilia
2. Pessoas equipadas com marca-pasos
3. As pessoas com doenças de coração
4. As pessoas como pele alérgica ou malignidade
5. As pessoas com febre alta
6. Mulheres gravidas

PROCESSO DE TRATAMENTO

1. Tome un duche
2. Medida de peso e manter o registo
3. Massagens de 15 a 20 minutos
(O efeito sera melhor com os cosméticos de descomposição de gordura)



Guia básico de massagens



1. Presione a superfície da pele.



2. Método de massagem a volta do joelho.



8. Método de agarrar desde o centro o lado na parte posterior e no ventre.



9. Aperte as costas.



3. Método de pressionar profunda.



5. Método de golpe.



6. Método de corte.



7. Método de torcer com as mãos.

4. Massagem de pressão de ar durante 15-30 minutos.

(1) Por favor, envolva o cliente com película sobre a zona do corpo que deseja tratar. A continuação, o cliente deve colocar em tela de emagrecimento e acessórios que se encontram na cama facial.

(2) Inicie a máquina pulsando o botão de acender.
[On/Off] (Verifique o painel do diagrama 1).

(3) Deter a saída da estimulação eléctrica e de aquecimento por infravermelhos. (Verificar painel do diagrama 6, 21).

(4) Pulse o botão de saída de marcha / parado
[On/Off] (Verificar o diagrama no painel 11).

(5) Ajustar a pressão do ar e o modo de tempo, o que devia ser de acordo com a capacidade do

cliente, [Pressure] Verificar o diagrama no painel 17,18, 19,20,24).

5. De aquecimento por infravermelhos para 20-30 minutos.

(1) Por favor, envolva o cliente numa toalha molhada de acordo com o tratamento que deseja.

De seguida, o cliente deve pôr em tela de emagrecimento e acessórios que se encontra na cama facial.

(2) Inicie a máquina pulsando o botão de acender

[On/Off] (Verifique o diagrama 1).

(3) Deter a saída de ar e electro estimulação. Pres-são. (Verifique o diagrama 6, 18).

(4) Pulse o botão de saída de marcha / parado. (Verifique o diagrama no painel 11)

(5) Ajuste a intensidade do aquecimento a 8, a continuação, quando la temperatura alcançar níveis altos ajustar a intensidade de 5 / 6 para manter a temperatura. (Verifique o painel do diagra-ma 21, 22, 23).

6. Electro estimulação durante 10 minutos

(1) Inicie a máquina pulsando o botão de encender (Verifique o painel do diagrama 1).

(2) Deter a saída de pressão do ar e do aquecimen-to por infravermelhos. (Verifique o painel do diagra-ma 18, 21)

(3) Pulse o botão de saída de marcha/ parado. (Verifique o diagrama no painel 11).

4) Selecione o botão de saída que deseja e logo ajustar a intensidade com o botão (Verifique o diagrama no painel 7).

((5) podemos escolher entre a forma manual ou automática para ajustar o modo de espera. Quan-do a luz vermelha é cintilante, que é o manual do estado, por outra parte que é automático. Há 5 no

modo manual estado., (Verifique o diagrama no painel 2, 3, 4) .

(6) A posição do eletrodo de parche, como indicam as imagens;

1> Imagen um: para o ombro e o pescoço.



Imagen 1

Função: melhorar a circulação do sangue do ombro até o pescoço, para baixar o peso do ombro e do pescoço; de lançamento neumáticos.

2> Imagen dois: para o ombro e o braço.



Imagen 2

Função: melhorar a circulação sanguínea do ombro e do braço; ambas para baixar de peso.

3> Imagem Três: barriga



Imagen 3

Função: melhorar a circulação sanguínea do ventre; Baixa o peso para o ventre;

4> Imagem Quatro: para o músculo

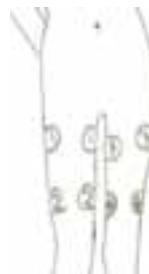


Imagen 4

Função: com o trato muscular do músculo. Baixa o peso no músculo

7. Podemos optar pôr fazer o tratamento da pressão do ar/ aquecimento por infravermelhos/ eletro de estimulação.

8. Tomar de novo um duche depois do tratamento.

9. Todo o tratamento recomenda-se durante 90 minutos.

OUTRA PROPOSTA DE PRESSÃO DE AR

1. Baixar o peso das pernas

(i). Pôr na tela de emagrecimento acessório de botas e pernas

(ii). Pulse o botão . (Verifique o diagrama do painel 15).

(iii) Ajuste a pressão do ar e a frequência do

 modo  (Verifique o painel do diagrama 17,18,19,20).

2. Relaxe o corpo .

1) Pôr em tela de emagrecimento.



(2) Pressione os botões

(3) Ajuste pressão do ar e o tempo como modo



de . (Verifique o painel no diagrama 17,18,19,20).

3. Pressão do ar da toxina

(1) Pôr em tela de emagrecimento



(2) Pressione os botões



(3) Pressão do ar da toxina.  Pôr em tela de emagrecimento. (Verifique o painel no diagrama 15, 16, 17,18).

Observações: No tratamento, se o cliente se queixa que a intensidade demasiado forte, por favor



ajuste no botão  (Ver o painel no diagrama 24).

PRECAUÇÕES

1. Massaje o corpo com um cosmético reafirmando (gel ou óleo), aplique este no eletrodo de parche para obter um melhor efeito. A intensidade deve estar de acordo com a sensação do cliente. A temperatura deve ser ajustada para menor ou maior gradualmente. No caso da sensação de dor, por favor, comprove se o parche do eletrodo está completamente em contacto com a pele.
2. Para a função de infravermelhos distante, deve estabelecer-se com o nível 8 em primeiro lugar, enquanto que o cliente se começa a sentir

quente, por favor passe para o nível 5 a 6. Manter a temperatura.

Inverno/ Verão o comutador que está situado em cima do pé seleciona-se segundo a temperatura e a temperatura da habitação.

3. Durante o tratamento, deve comunicar-se com cosmetologia o cliente, verificar a temperatura e o suor, e fazer com que o ajuste corresponda.
4. Durante o tratamento, por favor, tenha a máquina em situação de pausa para esta função se deseja obter um determinado tratamento.
5. Por favor, esterilizar a roupa e os eletrodos de parche com 50% depois de usar o álcool.

ESPECIFICAÇÕES

Potência	Voltagem	Hz.
240/110V	350W	50/60Hz.
Peso	Peso máquina principal: 29 Kg	Dimensões Máquina principal / Manta
	Manta: 6,6 Kg	103 55 46 cm 91 41 26 cm

LISTA DE ACESSÓRIOS DE EMBALAGEM

Nome do artigo	Unidade	Quantida-de	Obser-vações
Corpo do aparelho	Grupo	1	
Tela de emagrecimento	Grupo	1	
Cabo do parche	Tira	5	
Banda elástica	Grupo	1	
Manta	Grupo	1	
Parche Eletrodo	Peça	10	
Cabo de potência	Tira	1	
Fusível	Peça	2	
Instruções	peça	1	

FALHOS DE MONTAGEM ORDINARIOS

Mal Funcionamento	Desmontagem
Não funciona acendido	Comprobe que esta bem ligado
	Comprobe que esta acendido
Não há electricidade	Comprobe que o cabo de eletrodo de estimulação esta bem ligado com a máquina
	Comprobe que o cabo do eletrodo de estimulação esta bem ligado com o cabo
Corpo do aparelho não aquece	Comprove que o corpo do aparelho esta bem ligado a máquina
Corpo do aparelho não se infla	Comprove o conector do control de plástico se esta ligado a máquina
Quando o aparelho esta acendido se recaliente	Se recalienta, por favor desligue o aparelho até ficar frio

5. Por favor, extrair o cabo de alimentação de pois de usar-lo por sua segurança.
6. Não ponha nada no aparelho de toma, de contrario pode provocar um fogo de eletricidade. Se algo entra no aparelho, por favor não recolha o cabo, contate o nosso distribuidor imediatamente.
7. Por favor, não colocar o aparelho de forma em que nada permaneça de forma constante, evitar danificar mais.
8. Nossa empresa tem o direito de modificar a informação contida nestas instruções.

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDADE

1. Por favor, não desmonte o aparelho o tratar de fazer outra operação, que não se indique nas nossas intruções. Todas as reparações de trabalho deve ser realizado e admitido pelo nosso pessoal profissional.
2. Por favor, não reunir ou utilizar o aparelho, enquanto que você esteja perto da água ou se as suas mãos estão molhadas. Observe que não verte o líquido na maquina.
3. Por favor, retire o tomada da corrente electrica quando se cumprem as condições indicadas a continuação. Mantenha-se em contacto com o profissional de mantimento da estação.
 - 1> O aparelho tocou líquidos
 - 2> O aparelho tem cheiro, a tabaco ou em voz alta e forte ruído.
 - 3> O cabo esta roto.
 - 4> O aparelho caiu e partiu-se.
4. Por favor, não ponha nada nos cabos, não coloque o aparelho em qualquer lugar onde alguém possa pisar o cabo.



 **POLSKI**

TERMO SLIM BODY SHAPER



FUKCJE URZĄDZENIA

Stworzony z myślą o aktualnych potrzebach rynku. W jednym urządzeniu zawarte są trzy tak ważne w świecie piękna funkcje masażu podciśnieniowego, elektrostymulacji magnetycznej i podczerwieni.

MASAŻ PODCIŚNIENIOWY

Masaż podciśnieniowy oddziałuje na skórę oraz podskórную tkankę łączną. Stymuluje w ten sposób unaczynienie zwiększaając cyrkulację krwi. Eliminuje toksyny oraz zbędne produkty przemiany materii, usuwa nadmiar wody z organizmu objawiający się bólem i opuchnięciem nóg, obrzękami oraz powstawaniem cellulitu wodnego.

Masaż podciśnieniowy przywraca prawidłowy metabolizm oraz przepływy chlonki w naczyniach limfatycznych, pomaga zwalczyć cellulit poprzez rozbijanie i usuwanie tkanki tłuszczowej, polecony jest dla kobiet po porodzie. Może być stosowany na blizny pooperacyjne, po poparzeniach, w różnorakich bólach kręgosłupa. Presoterapia pomaga ujędrnić skórę i wymodelować sylwetkę.

ELEKTROSTYMULACJA MAGNETYCZNA

Niskiej częstotliwość energii elektrycznej stymuluje mięśnie. Doprowadza do skurczy, których skutkiem jest rozkład dużej ilości komórek tłuszczowych.

Poduszki elektryczne umieszczone w odpowiednich miejscach regulują funkcję przyspieszania wewnętrznego metabolizmu organizmu. W ten sposób zapobiega się powstawaniu nowych komórek tłuszczowych.

Należy również zaznaczyć, iż elektrostymulacja pozostawia skórę przystą i lokwiduje jej zwiotczanie.


PROMIENIOWANIE PODCZERWONE

Promieniowanie podczerwone wnikają bezpośrednio do struktury komórkowej tłuszcza.

Uwalnianie dużej ilości energii cieplnej przyspiesza krążenie krwi i pracę węzłów chłonnych.

Przyspiesza przemianę materii poprzez reakcję biochemiczną, który zużywa ATP i powoduje katabolizm komórek tłuszczowych a tym samym spadek tłuszcza.

PANEL KONTROLI

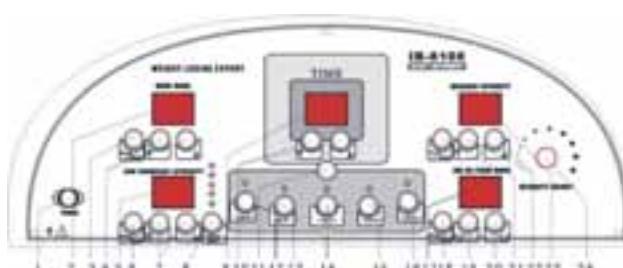

1. Włączony / Wyłączony
2. Wyświetlacz trybu elektrostymulacji
3. Włączony / Wyłączony tryb elektrostymulacji
4. Wybór programu elektrostymulacji
5. Intensywność elektrostymulacji
6. Włączony/wyłączony intensywność elektrostymulacji
7. Przyciski wybory intensywności elektrostymulacji
8. Wybór elektrostymulatora. Każdy czerwony punkt odpowiada innemu wyjściu.
9. Czasomierz
10. Przyciski wybory czasu.
11. Przycisk aby rozpocząć prace po wybraniu czasu. Wybór funkcji.
- 12.-16. Pwejścia do podłączenia elektrod.
17. Wyświetlacz programu masażu podciśnieniowego.
18. Włączony/wyłączony programu masażu podciśnieniowego.
19. -20. Wybór wyjścia masażu podciśnieniowego.
21. Włączony/ wyłączony promieniowanie podczerwone.

22. Przyciski wybory intensywności promieniowania podczerwonego.
23. Wyświetlacz trybu promieniowania podczerwonego.
24. Regulacja intensywności promieniowania podczerwieni.


- (6) - Promie Niowanie Podczerwone.
- (7) - Przyłącza do masażu Podciśnieniowego.

Uwaga

Proszę się upewnić czy nie brakuje żadnej części.


Przed oddaniem urządzenia do eksploatacji proszę się upewnić czy natężenie prądu jest odpowiednie. W przypadku innych wątpliwości bądź utrudnień proszę natychmiast kontaktować się z producentem.

MASAŻ PODCIŚNIENIOWY I DRENAŻ LINFATYCZNY. AKCESORIA

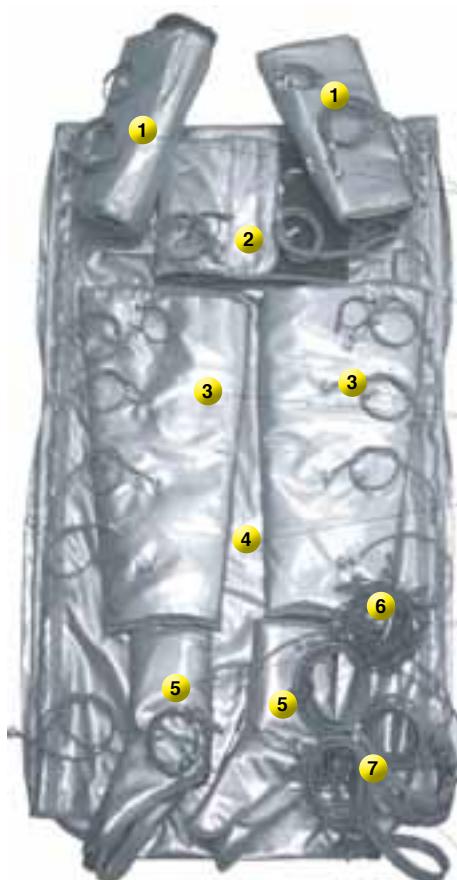

- (1) - Ramiona. /
- (2) - Pas.
- (3) - Nogi.
- (4) - Koc.
- (5) - Stopy.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA AKCESORIÓW PRZED MASAŻEM PODCIŚNIENIOWYM, DRENAŻEM LIMFATYCZNYM.

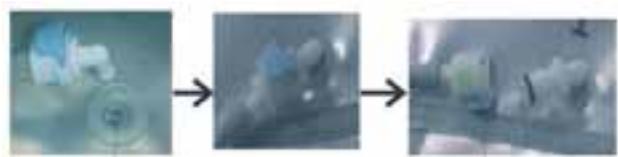


Przewody powietrza są te, które mają białą głowę z małym kranem: wprowadzenie tych głów w otworach o numerach odpowiadających w kocu.

Niebieski przycisk służy do odblokowania przewodów powietrza aby mozna je było usunąć.

Złącza z główką metalową są do promieniowania podczerwonego. Należy je podłączyć zgodnie z numeracją na kocu.



Gdy wszystkie przewody i złącza są podłączone można podłączyć koc do urządzenia i przystąpić do jego eksploatacji.

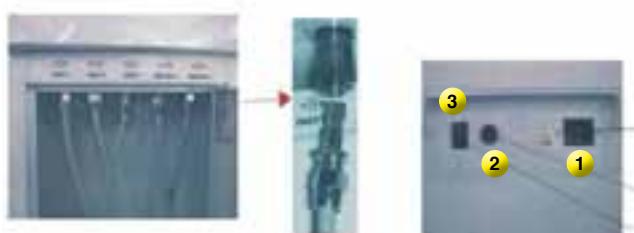

Przycisk numer 1. ON / OFF


Po włączeniu aparatu zapalają się wszystkie kontrołki .

W zależności od wymaganych funkcji pozostawić je włączone lub je wyłączyć. W momencie gdy funkcja jest wyłączona kontrolka wyłącza się.



ELEKTROSTYMULACJA

Podłączyć przewody w zależności od potrzeb ich użycia.

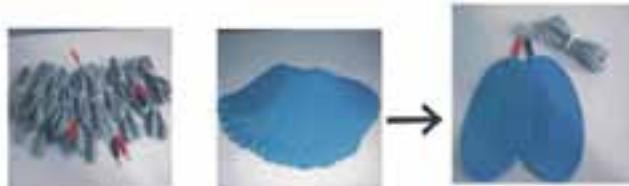


Przysick numer 18 rozpoczyna funkcję masażu podciśnieniowego . Jego aktywność oznacza zapalone czerwona kontrolka na panelu.

Przyciskami od 19-20 wybieramy program.

Intensywność wybieramy za pomocą pokrętły przedstawionego poniżej w skali od 13-35.

Przycisk numer 24.

Promieniowanie podczerwone

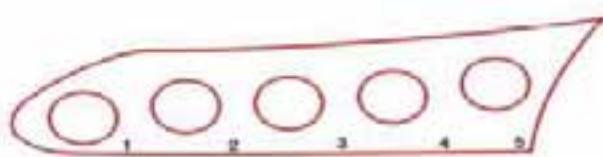

Można stosować łącznie z masażem podciśnieniowym. Podawane na wspepie okablowanie należy podłączyć do koca w podłączach numer 1-5, po prawej stronie.



. Przyciskiem numer 21 włączany promieniowanie podczerwone. Zapalona czerwona kontrolka oznacza, że jest w użyciu.


Intensywność natomiast przyciskiem numer 22.

Czas zabiegu należy wybrać za pomocą klawisza z numerem 10.

Przyciskiem numer 11 rozpoczynamy eksploatację urządzenia. Wszystkie części odpowiadające masażowi podciśnieniowemu napełniają się powietrzem i kombinezon w tym samym czasie nagrzewa się promieniowaniem podczerwonym, oczywiście jeśli promieniowanie podczerwone jest podłączone i wskazane w zabiegu.

Przyciski 9-16 rozpoczynają stymulację.

Podłączyć przewody do poprzednio wskazanych wyjść

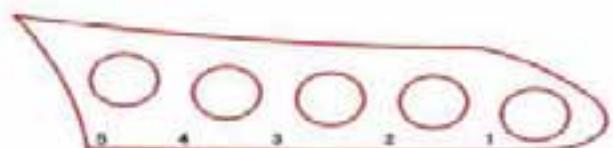

5 4 3 2 1.

Przyciskiem numer 3 wybieramy funkcję. Czerwone światło oznacza, że pracuje prawidłowo.


Przyciskiem numer 4 wybieramy program najbardziej odpowiadający potrzebom klienta:

1. Utrata masy ciała.
2. Cellulitis.
3. Zagieg orzeźwiający.
4. Drenaż limfatyczny.
5. Zabieg na zwiotczale mięśnie.

Po wybraniu odpowiedniego programu należy dobrą intensywność zabiegu, indywidualnie w zależności od każdego klienta.

Przyciskiem numer 5 wybieramy intensywność elektrostymulacji.

Przysickiem numer 8 wybieramy wyjścia, z którymi chcemy pracować. Wyjścia włączone mają zapaloną czerwoną kontrolkę . Jeśli kontrolka jest zapalona na dole oznacza to, że pracujemy tylko na jednym wyjściu, jeżeli natomiast zapalona jest kontrolka na górze oznacza, iż pracujemy na pięciu wyjściach.

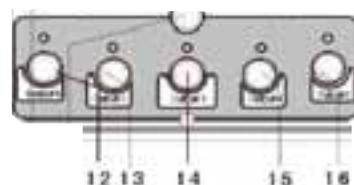

Złącza należy położyć bezpośrednio na skórę. Aby osiągnąć najlepsze rezultatu zaleca się umieszczenie złączy z wykorzystaniem żelu przewodzącego, normalnie wykorzystywanego go USG.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłączyć przewód do gniazda elektrycznego.
2. Włączyć przycisk zasilania z tyłu urządzenia.
3. Sprawdzić, czy zostały prawidłowo podłączone wszystkie przewody powietrza i podczerwieni, zarówno do głównej maszyny, jak i do koca. Wszystkie przewody i rury posiadają zaznaczone odpowiadające im numery, w celu zapewnienia poprawnego montażu.
4. Nacisnąć przycisk POWER na głównej konsoli urządzenia.

5. Należy dostosować czas zabiegu przyciskając przycisk 10. Minimalny czas wynosi 1 minutę i maksymalny, jaki można ustawić wynosi 60 minut. Zwykle zaleca się ustawić zabieg na 30-60 minut.
6. Podczerwień. Za pomocą przycisku 21 można włączyć lub wyłączyć funkcję podczerwieni. Jeśli na wyświetlaczu (24) pojawia się czerwona kropka, funkcja jest aktywna. Ponownie naciskając przycisk 21 można włączyć ją w każdej chwili i czerwona kropka zniknie z wyświetlacza.
(24). Istnieje osiem poziomów intensywności, które można dostosować w zależności od potrzeb danego przypadku. Nie jest zalecane stosowanie tego zabiegu u osób z problemami z układem krążenia.
- UWAGA:** Ze względu na odmienny charakter klientów, nie zaleca się rozpoczęcia zabiegu z zastosowaniem wysokiej intensywności, aby uniknąć poparzenia.
7. **AIR DE-TOXIN MODE** (wyświetacz nr 17). Aby włączyć lub wyłączyć funkcję napełniania presoterapii, należy wcisnąć przycisk nr 18. Jeśli wyświetla się czerwona kropka na ekranie nr 17, ta funkcja jest aktywna, natomiast jeśli czerwona kropka się nie wyświetla, oznacza to, że funkcja nie została wybrana. Urządzenie posiada 3 tryby napełniania powietrza. Można je wybrać za pomocą przycisku nr 19:

- W trybie 1, ciśnienie powietrza przechodzi od stóp do pasa.
- W trybie 2, ciśnienie powietrza przechodzi od pasa do stóp.
- W trybie 3, ciśnienie powietrza jest wywierane wszędzie na raz (funkcja pompowania). Za pomocą przycisku nr 20, można wybrać tempo napełniania komór powietrznych. Istnieje 5 poziomów do wyboru.

Za pomocą ruletki nr 24 można również dostosować intensywność ciśnienia powietrza.

Z celach higienicznych, dla tego typu zabiegów, zaleca się urzywanie dla każdego klienta specjalnych spodni z celulozy.

8. **ELEKTROSTYMULACJA.** Jeśli ta funkcja została aktywowana, na ekranie nr 4, powinna pojawić się czerwona kropka. Jeśli chce się ją wyłączyć, można to zrobić za pomocą przycisku nr 6 (czerwona kropka zniknie z wyświetlacza). Upewnij się, że przewody przeznaczone do tej funkcji zostały odpowiednio podłączone do przedniej części urządzenia, a elektrody dobrane w pary (dodatnia + ujemna) podpięte do każdego z kabli. W celu właściwego zastosowania, należy umieścić opaski elastyczne na pacjencie, nałożyć niewielką ilość żelu przewodzącego na każdej z elektrod, przed umieszczeniem ich pod wcześniej zamocowanymi opaskami.

Nacisnąć przycisk nr 11, który aktywuje całe urządzenie. Jeśli będzie się pracować tylko z elektrostymulacją, zalecamy wyłączenie zarówno funkcji presoterapii, jak i podczerwieni. Następnie należy wybrać tryb fali, z którą chce się pracować. Urządzenie posiada 5 wstępnie skonfigurowanych programów, które mogą być wybrane za pomocą przycisków 3 i 4, i wyświetlają się na wyświetlaczu nr 2.

- Program 1. Nadaje się do dowolnej części ciała, jest przeznaczony głównie dla utraty masy ciała i redukcji tłuszczy.
- Program 2. Zalecany do utraty wagi. W leczeniu głębokiego tłuszczy.
- Program 3. Wzmacniający / ujędrniający.
- Program 4. Przeznaczony do poprawy krążenia żylnego i limfatycznego, realizuje drenaż i ułatwia wydalanie tłuszczy i toksyn.
- Program 5. Relaksujący. Mające na celu rozluźnienie mięśni i poruszenie tłuszczy.



Ponadto można wybrać ustawienie ręczne , lub aby urządzenie automatycznie przechodziło z jednego programu do drugiego. Wyboru dokonuje się za pomocą przycisku nr 2. Jeśli na ekranie nr 2 pojawi się czerwona kropka, działanie jest automatyczne. Jeśli jednak czerwona kropka nie pojawi się, wybrana jest obsługa ręczna.

Za pomocą przycisku nr 8, można przechodzić od jednej do drugiej, dla każdego z wyjść elektrostymulacji, ponieważ ustawienie musi być niezależne dla każdego z nich. Z każdym naciśnięciem przycisku 8, czerwone światło będzie się przesuwać do każdego z 5 pilotów, które znajdują się nad przyciskiem. I dla każdego z nich należy wybrać intensywność impulsów, używając przycisków 7 i 8, w zależności od czułości klienta. Urządzenie posiada 8 poziomów intensywności.

UWAGA

Następujące osoby nie mogą używać aparatu:

- Chorzy na hemofilię
- Posiadający rozrusznik
- Z chorobami serca
- Mający alegie skórne bądź choroby nowotworowe
- Z wysoką gorączką
- Kobiety w ciąży

PROCES ZABIEGU

1. Położyć klienta na łóżku kosmetycznym.
2. Dać klientowi specjalne spodnie do presoterapii lub inne podobne.
3. Przeprowadzić masaż przez 15-20 minut
(Efekt będzie lepszy, jeśli korzysta się ze specjalnych kosmetyków pomagających w utracie wagi)
4. Połącz wszystkie akcesoria z kocem do presoterapii. Sesja presoterapii powinna trwać ok 15-30 minut.
 - (1) Włączyć urządzenie.
 - (2) Sprawdzić, czy funkcja presoterapii jest aktywna.

- (3) Wstrzymać funkcję stymulacji elektrycznej i podczerwieni.
- (4) Wybrać czas pracy.
- (5) Dostosować ciśnienie powietrza i pracy, w zależności od specyficznych warunków każdego klienta.
- (6) Można włączyć funkcję ogrzewania przez podczerwień.
- (7) Po zakończeniu zabiegu, można przeprowadzić sesję elektrostymulacji przez około 10 minut.
- (8) Można wybrać sterowanie ręczne lub automatyczne. Gdy na wyświetlaczu pojawia się czerwone światło oznacza to, że jest włączony automatyczny tryb pracy.
- (9) Elektrody powinny być zawsze umieszczone z urzyciem żelu przewodzącego i tylko na początku i końcu mięśnia, aby uniknąć kontuzji.
- (10). Cały zabieg może trwać 90 minut.

Poradnik Podstaw Masażu



1. Naciskać na powierzchnię skóry.

2. Metoda masażu wokół kolana.



1> Bark i szyja.



Rysunek 1

3. Metoda głębokiego głaskania.
4. Metoda rozcierania.



Funkcja: poprawiają krażenie krwi.

2> Bark i ramię.



Rysunek 2

5. Metoda uderzania.
6. Metoda oklepywania.



Funkcja: poprawiają krażenie krwi w obszarze oraz redukują wagę.

3> Brzuch



Rysunek 3

7. Metoda ugniatania.



Funkcja: poprawiają krażenie krwi w obszarze oraz redukują masę ciała.

4> Uda



Rysunek 4

8. Metoda ugniatania od centralnej strony pleców i brzucha.



Funkcja: wzmocnia obszar i redukuje masę ciała.

9. Nacisnąć na plecy.

Pozycja elektrod i opasek, jak pokazano na poniższych rysunkach:



OSTRZEŻENIA

1. W celu uzyskania najlepszych wyników, zawsze jest wskazane używanie żelu przewodzącego wraz z elektrodami elektrostymulacji. Intensywność powinna być dostosowana do potrzeb klienta. Powinna dostosowywać się stopniowo, od niskiej do wysokiej. Jeśli klient odczuwa ból, należy sprawdzić, czy nakładka znajduje się w prawidłowym kontakcie ze skórą.
2. Dla zabiegu podczerwieni należy ustawić poziom 8 na początku i w momencie jak klient poczuje ciepło powinno się zmniejszyć do poziomu 5 lub 6. Utrzymać tę temperaturę.
3. Podczas zabiegu, należy rozmawiać z klientem w celu sprawdzenia temperatury i dokonania odpowiedniej korekty.
4. W trakcie leczenia, należy ustawić urządzenie w trybie oczekiwania, przy zabiegach, które nie są wykonane w tej sesji.
5. Należy zawsze używać spodni jednorazowych lub sterylizować normalne przed użyciem przez następnego klienta.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	Moc	Hz.
240/110V	350W	50/60Hz.
Waga	Waga głównej maszyny: 29 Kg	Wymiary maszyna główna / koc
	Koc: 6,6 Kg	103 × 55 × 46 cm 91 × 41 × 26 cm

LISTA OPRZYRZĄDOWANIA

Nazwa artykułu	Jednostka	Ilość	Obserwacje
Korpus aparatu	Zestaw	1	
Tkanina wyszczuplająca	Zestaw	1	
Kabel do nakładek	Pas	5	
Opaska elastyczna	Zestaw	1	
Koc	Zestaw	1	
65 nakładek elektrod	Część	5	
95 nakładek elektrod	Pieza	5	
Kabel zasilający	Pas	1	
Bezpiecznik	Część	2	
Instrukcje	Część	1	

BŁĘDY W INSTALACJI

Usterka	Rozwiążanie
Aparat nie działa, kiedy jest włączony	Upewnić się, że jest prawidłowo podłączony.
Brak energii elektrycznej	Sprawdź, czy kabel elektrostymulacji jest połączony do urządzenia. Upewnij się, że kabel elektrostymulacji jest prawidłowo podłączony.
Urządzenie nie grzeje	Upewnij się, że oprzyrządowanie jest prawidłowo podłączone do urządzenia.
Aparat nie pompuje	Sprawdź plastikowe złącze sterowania.
	Urządzenie włączone przegrzewa się.
Upewnij się, że jest podłączony do urządzenia.	Należy je wyłączyć, aż ostudzi się samodzielnie. Sprawdź, czy napięcie zasilające jest poprawne (potrzebny jest profesjonalny personel do tej operacji).

WAŻNA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie należy demontować ani próbować manipulować urządzeniem inaczej niż wskazano w instrukcjach. Wszystkie naprawy muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel.
2. Nie należy instalować ani używać urządzenia, w pobliżu wody lub mokrymi rękami. Nie rozlewać płynów na urządzenie.
3. Należy odłączyć urządzenie, w następujących sytuacjach:
 - 1) Urządzenie zostało narażone na kontakt z płynami.
 - 2) Urządzenie dziwnie pachnie, pojawia się dym lub słychać dziwne odgłosy.
 - 3) Kabel zasilania jest uszkodzony.
 - 4) Sprzęt został upuszczony i uszkodzony.
4. Proszę nie kłaść nic na kablach, nie należy umieszczać urządzenia w miejscu, gdzie można po nich deptać.
5. Dla bezpieczeństwa proszę odłączyć przewód zasilający po użyciu.
6. Nie umieszczać niczego w gnieździe wyjściowym urządzenia, w przeciwnym razie może to spowodować pożar. Jeśli coś się dostanie do wewnętrz urządzenia, nie wolno usuwać go samodzielnie, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą lub naszą firmą.
7. Proszę umieścić urządzenie w stabilnym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia.
8. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

